

機械器具 76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ 35457000

MMI ネブライザーキット AT-NEB

再使用禁止（AT-NEB 用フィルター）

【警告】

薬液の種類、用法・用量については、必ず医師の指示に従うこと。


【禁忌・禁止】

1. AT-NEB 用フィルターは再使用禁止。
2. 本品は同一患者使用のため、他の患者に使用しないこと。
3. 3 歳未満の子供や適切にマウスピースを使用できない患者に使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 構成ユニット

本品は、キャップ、バッフル、薬液ボトル本体、マウスピース、送気ホース、AT-NEB 用フィルターから構成される（AT-NEB 用フィルターのみの別売品）。

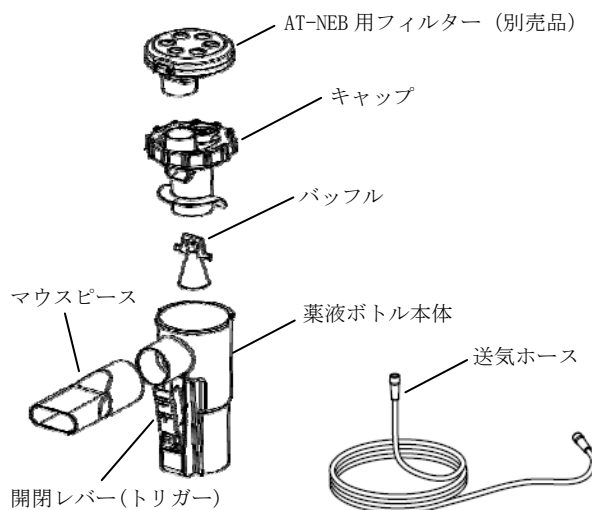

薬液ボトル容量：最大 6mL

適正薬液量：約 2～6mL

適正送気流量：5～9L/分

性 能	本体 (A24)	エア- (5L/分)	エア- (6L/分)
噴霧能力 (mL/分)	約 0.2	約 0.35	約 0.45
MMD (粒子径中央値) (μm)	約 5	約 2.4	約 2.3
5 μm 以下の粒子質量比率	57%	88%	92%
2 μm 以下の粒子質量比率	13%	71%	74%

※測定条件 0.9%生理食塩水、25℃、57%RH

2. 原材料

マウスピース：ポリプロピレン

送気ホース：ポリ塩化ビニル

（可塑剤：フタル酸ジイソノニル）

【使用目的又は効果】

患者に吸入させるため、エアロゾル化した医薬品を供給する装置をいう。エアロゾルを発生させる医薬品のリザーバ、バッフルを内蔵する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 薬液ボトル本体に薬液を入れる。
- 2) 薬液ボトルを組み立てる。必要に応じて AT-NEB 用フィルター（別売品）を薬液ボトルのキャップに装着する。
- 3) ネブライザー用コンプレッサーの送気口と薬液ボトルに送気ホースを取り付ける。
- 4) 薬液ボトルを持ち、ネブライザー用コンプレッサーの電源を入れる。
- 5) マウスピースを口にくわえ、開閉レバー（トリガー）を閉じて吸入する。呼気時には開閉レバー（トリガー）を開く。
- 6) 吸入終了後、ネブライザー用コンプレッサーの電源を切る。
- 7) ネブライザー用コンプレッサーの送気口と薬液ボトルから送気ホースを取り外す。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 吸入する際、薬液ボトルは 45 度以上傾けないこと [霧化能力が低下したり、薬液もれが生じるため]。
- 2) ノズルが詰まったら本品を新しいものに交換すること。
- 3) 送気ホースは折り曲げないこと。

3. 組み合わせて使用する医療機器

- 1) 本品は「販売名：MMI ネブライザー 届出番号：27B1X00024000268」と併用して使用する。
- 2) 上記以外のネブライザー用コンプレッサー（流量 5～9L/分）と併用して使用できる。
- 3) 施設内の中央配管システム（流量 5～9L/分）と併用して使用できる。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 薬液ボトルの最大薬液量（6mL）を超える薬液を入れないこと [霧化能力が低下したり、液もれを生じるため]。
- 2) 水を用いて吸入しないこと。
- 3) 小児（3 歳以上）が吸入する場合は、保護者の監督の下で行うこと。
- 4) 本品は、煮沸消毒・高圧蒸気滅菌しないこと。

2. その他の注意

バッフルを無理な力を加えて変形させたり、薬液ボトルのノズル部をピン等で突いたりしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間（耐用期間）

使用開始から 4 週間 [自己認証（当社データ）による]

***【保守・点検に係る事項】**

- 1) 使用前に、汚れ・破損・変形等を点検すること。
- 2) 薬液ボトルとマウスピースは使用後すぐに残った薬液を捨て、清潔な水で洗浄すること。汚れが落ちにくいときは中性洗剤と温水で洗浄し、洗浄後は清潔な水で洗剤をじゅうぶん洗い流すこと。
- 3) 本品を薬液消毒するときは各種消毒液の取扱説明書の注意事項に従うこと。消毒液から取り出した後は清潔な水でじゅうぶん水洗いし、消毒液の残留がないように注意すること。
- 4) 洗浄後すぐに清潔な場所でじゅうぶん乾燥させること。
- 5) 洗浄しても汚れが落ちないときは、本品を新しいものに交換すること。
- 6) 送気ホースは使用后、結露や水分が残っていないか確認し、水抜きを行ってから乾燥すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：ロスマックス イノテック社 台湾

Rossmax InnoTek Corp.