


PARI ペップ S システム

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

本品は、PARI ペップ S 本体及びノーズクリップから構成される。

代表的写真

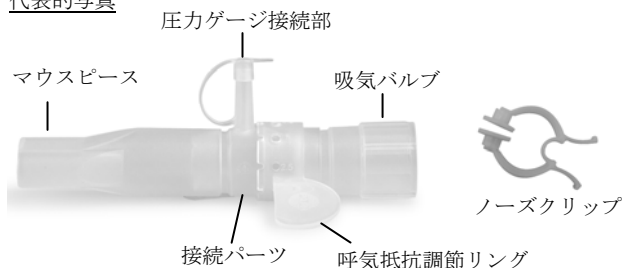

2. 原材料

マウスピース : ポリプロピレン

ノーズクリップ : TPE、ポリアセタール

3. 原理

息を吹き込むと、呼吸抵抗調節リングによって呼吸抵抗が変動し、呼気に陽圧がかかり、肺泡や気管支などの気道を広げ、分泌物の移動を促す。

【使用目的又は効果】

患者に刺激を与えて換気を改善する非能動型装置である。

【使用方法等】

1. 使用方法

① PARI ペップ S システムを単独で使用する場合

- 1) 呼吸抵抗調節リングのくぼみのある方を内側 (写真のように) にして接続パーツに取り付ける。
- 2) 吸気バルブを接続パーツに接続し、反対側にマウスピースを接続する。
- 3) 鼻にノーズクリップを取り付け、治療を開始する。

② ネブライザーと組合せて使用する場合

- 1) ネブライザーをネブライザーの取扱説明書に従って組み立てる (呼吸バルブ付きマウスピースは除く)。
- 2) 呼吸抵抗調節リングのくぼみのある方を内側 (写真のように) にして接続パーツに取り付け、ネブライザーに接続し、反対側に本品のマウスピースを接続する。
- 3) 鼻にノーズクリップを取り付け、吸入治療を開始する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 初めて使用する場合は、必ず洗浄・消毒を行うこと。
- 2) 使用前に必ず手を洗浄すること。
- 3) 圧力ゲージを使用しない場合は、圧力ゲージ接続部のキャップを閉めること。
- 4) 吸気バルブの青い弁が平らな状態になっているか確認すること。

3. 組み合わせて使用する医療機器

本品は「販売名 : PARI ネブライザー 届出番号 : 27B1X00024000317」と併用できる。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中、めまい・息切れ・頭痛等の症状が生じた場合は直ちに使用を中止すること。
- 2) 呼吸抵抗の大きさ、使用頻度及び使用期間については、医師等の指示に従うこと。

2. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- 1) 5 歳未満の患者には使用しないこと。
- 2) 小児 (5 歳以上) が吸入する場合は、保護者の監督の下で行うこと。

*【保管方法及び有効期間等】

使用期間

2 年 [自己認証 (当社データ) による]。

*【保守・点検に係る事項】

1. 同一患者使用の場合

- 1) 使用後、中性洗剤と温水で洗浄し、清潔な水で洗剤をじゅうぶん洗い流すこと。
- 2) 消毒する場合は、すべての部品を分解し、以下の方法のうち適切な方法で行うこと。
 - ・煮沸消毒 (15 分間)
 - ・蒸気消毒 (例 : 哺乳瓶蒸気消毒器) 等
- 3) 洗浄後すぐに乾いた布で水滴を拭き取り、清潔な場所でじゅうぶん乾燥させること。

2. 複数の患者が使用する場合

- 1) 複数の人が使用する場合は、必ず使用する人ごとに洗浄・消毒後、滅菌をすること。
- 2) 使用後、すべての部品を分解し、ウォッシュャーディスインフェクター等で洗浄・消毒する。滅菌は、以下の方法のうち適切な方法で行うこと。
高圧蒸気滅菌 : 121℃ 20 分又は 134℃ 3 分

3. 点検

- 1) 使用前に各部品に破損、変形、変色等の損傷がないか確認すること。
- 2) 使用前に各接続部がしっかりと接続されているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者 : パリテック社 ドイツ

PARIttec GmbH Production und Logistik