



* I V R - 0 4 5 - 0 0 6 *

2017 年 5 月改訂（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）
*2009 年 2 月改訂（第 3 版）

承認番号 20800BZY00896000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

高度管理医療機器 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル 70320100

バスキャスカテーテル（イントロデューサーニードル）

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

穿刺針の留置中は、親指で開口部を塞ぎながら操作し、空気の吸い込み及び出血を防止すること。[空気塞栓及び出血のおそれがある。]

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止

2. 適用対象（患者）

本品に含まれる物質に対するアレルギー反応を示すか、その疑いがある患者。

【形状・構造及び原理等】

*1. 形状

材質：ステンレス



【使用目的又は効果】

本品は、人工腎臓（血液透析、血液濾過、血液透析濾過等）の実施を目的に血管内に留置して送脱血を行うために使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法等

超音波ガイド下等で穿刺する。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- (1) 静脈穿刺の際は、超音波ガイダンスを使用すること。[超音波ガイダンスを使用しない場合、穿刺回数の増加及び機械的合併症を引き起こすおそれがある。]
- (2) 万一、穿刺針が動脈に入った場合は、穿刺針を引き抜き、手で数分押さえて圧迫止血すること。また、胸腔内に入った場合は、穿刺針を引き抜き、気胸の発生が無いことを確認すること。
- (3) 穿刺針内にガイドワイヤーを挿入している状態で、ガイドワイヤーのみを操作しないこと。万一、穿刺針を挿入した状態で、ガイドワイヤーを引き戻さなければならない場合には、穿刺針及びガイドワイヤーの両方を一体化して引き戻すこと。[穿刺針の針先によりガイドワイヤーが損傷もしくは切断し、血管や臓器の穿孔及び損傷のおそれがある。]

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

(1) 不具合

- ・破損

(2) 有害事象

- ・空気塞栓症
- ・アレルギー反応
- ・出血
- ・腕神経叢損傷
- ・血腫
- ・血胸
- ・水胸症
- ・穿刺部の皮膚の炎症や壊死あるいは瘢痕化
- ・血管や臓器の裂傷・穿孔
- ・気胸
- ・局所麻酔あるいは全身麻酔、外科手術及び術後の回復に関連した合併症

- ・胸管損傷
- ・血管浸食
- ・感染

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温多湿および直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること。

2. 有効期間


使用期限は直接の包装及び外箱に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社メディコン
連絡先 : 06-6203-6546

外国製造業者 : C. R. バード社
C. R. Bard, Inc.

国名 : アメリカ合衆国

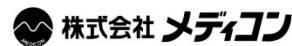

Bard、バード、VAS-CATH、バスキャスは、C. R. バード社の登録商標です。
本書の著作権は C. R. バード社が保有しています。