

2021年10月作成(第2版)

Nasal Wash Mist

使用に際して、この説明書を必ず  
お読みください  
また必要なときに読めるよう大切に  
保管してください



届出番号 39B2X10001000004

機械器具55 医療用洗浄器  
一般医療機器 鼻用洗浄器(JMDNコード 41599000)  
ハナノアクイックミスト

## 特 徴

### ① 外出先でも気軽に鼻洗浄

シュッと押すだけのミストタイプなので、  
外出先でいつでも気軽に鼻洗浄ができます

### ② 鼻にしみない、痛くない

体液に近い成分でできているので、鼻が  
ツーンと痛くありません

### ③ ミントの香りでスッキリ

鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ  
爽やかになります


### ④ 握りやすい容器デザイン

手が小さい人でもフィットしやすい形状なので、  
簡単にスプレーできます

### ⑤ 鼻の中に広がる微粒ミスト

ミストが鼻の中に広がり花粉や雑菌を洗い  
流します

## 形状・構造及び原理等

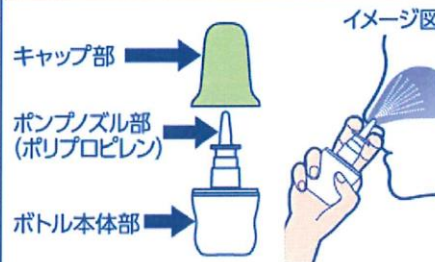

【形状及び構造】ボトル状で鼻腔内に挿入するための供給突起を有し、キャップ部とポンプノズル部(ポリプロピレン)、ボトル本体部の3部品から構成される  
【原理】外鼻孔から洗浄液を流し込んで鼻腔内を洗浄する鼻用洗浄器

【効果】鼻の奥に入り込んだ雑菌や花粉、ほこり等をしっかり洗い流します

## 使用方法等

1.キャップを取り外し、図のように持ってください 2.正面を向いたまま、ノズル先端を軽く鼻腔に入れ、ポンプを最後まで押して、左右それぞれ2〜3プッシュ程度スプレーし、鼻腔内を洗浄してください。※スプレー中は鼻から息を吸い込まないでください 3.洗浄後は片方ずつやさしく鼻をかんでください 4.使用後はノズルをティッシュ等で拭き取り、清潔にし、キャップを付けて保管してください ●はじめて使用するときには、必ず液が出るまで数回空押ししてください ●1日1〜3回を目安に使用してください



### ●使用方法に関する注意

(1)鼻水が多い場合は、使用前にやさしく鼻をかんで使用してください[洗浄液が汚染されるおそれがある] (2)洗浄後、強く鼻をかまないでください[耳の内部に洗浄液が入り、中耳炎になる恐れがある] (3)ハナノア洗浄液等他の鼻洗浄液を詰め替えて使用しないでください。無くなったなら新しい製品をお買い求めください (4)洗浄時、鼻腔から液が流れ出てくることがあるので、ティッシュ等で押さえてご使用ください (5)洗浄液を勢いよく噴霧したり、鼻から洗浄液を強く吸い込むと、鼻に痛みを感じる場合があります (6)ノズルの先端を針等で突くと折れた時危険ですのでおやめください

【使用上の注意】(1)嚥下障害がある方(食べ物や飲み物を飲み込みにくい方)は使用しないこと[洗浄液が気管支や肺に入る恐れがある] (2)耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師に相談すること (3)鼻の炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないこと (4)鼻の洗浄のみに使用し、目や耳には使用しないこと (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (6)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、こすらずに、すぐに流水で洗い流し、異常が残る場合はこの台紙を持って医師に相談すること (7)洗浄液を飲み込み異常が残る場合や、耳の内部に洗浄液が入り1日以上抜けない場合や、使用中に万一異常が生じた場合は、この台紙を持って医師に相談すること (8)他の人と共用しないこと

【保管方法及び使用期間等】(1)小児の手の届かない所に保管すること (2)直射日光、高温多湿の場所を避け、キャップを付けて保管すること (3)他の容器に入れ替えたり、他の液を入れて使用しないこと[誤用の原因になったり、品質が変わることがある] (4)持ち歩く際は、強い力を加えないこと (5)使用期限(ボトル底面に記載)を過ぎた洗浄液は使用しないこと

内容量:60mL

成分:精製水、塩化Na、PG、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、パラベン、CMC-Na、エデト酸Na、香料

MADE IN JAPAN

製造販売元・製造元  
明星産商株式会社

高知県南国市岡豊町八幡411番地1  
088-804-8111

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-06  
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)