

添付文書

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 カテーテル被覆・保護材（JMDNコード：70444000）

ホールド・プレイス

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品を感染部位に使用しないこと


【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造


ホールド・プレイス IV、動脈、ミッドラインカテーテル用

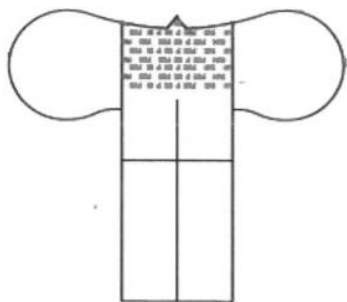

ホールド・プレイス CVC、PICC、動脈シース用

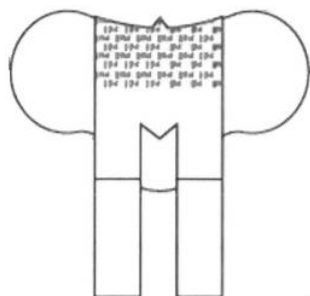

フィルムドレッシング

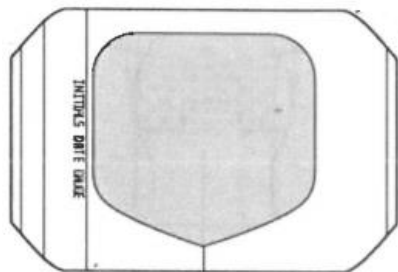

補助テープ



2. 原理

本品は、二股に分かれた粘着性を有するテープを交差させることによりカテーテル等を固定する。

透明の粘着フィルムは刺入部の汚染を防ぎ、カテーテル等の固定を補助する。

【使用目的又は効果】

本品は、粘着性を有する滅菌済みのフィルム材であり、カテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

【使用方法等】

1. 定められた手順に従って肌を消毒し準備します。患者によっては剃毛の必要もあるかもしれません。
先端部のプルタブを、2つのストリップの切れ目まで引きます。
2. ホールド・プレイス本体をカテーテルの下に滑らせて入れ、カテーテルやハブが、中央に来るようにします。
ハブを上からそっと押し、露出した粘着部に固定させます。
3. ホールド・プレイス本体とカテーテルを動かさないように抑えながら、底部のリリースライナーを引いて粘着部を肌に押し当てます。反対側も同じようにします。
4. プルタブを完全にはがしストリップをすべて露出させます。
5. ストリップをカテーテルのハブの向こう側まで持っていく、ストリップの上側をそっと押しながら固定させます。もう一つのストリップも同じようにしてクロスさせ山型に固定します。
ホールド・プレイス本体を押し付けてしっかり貼り付けます。
6. 挿入部の上にフィルムドレッシングを貼り付けます。ホールド・プレイス本体の全体につけることも可能ですが取替を容易にするため、半分までつけることをお勧めします。フィルムドレッシングの取替間隔は定められた手順に従ってください。ラインの固定に付属の補助テープを使うこともできます。液体で汚れてしまったり濡れてしまったりした場合は、ホールド・プレイス本体を取り換えてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管すること。
2. 有効期間
個包装及び外箱に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

製造業者：

Dale Medical Products, Inc.（アメリカ合衆国）