

添付文書

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用光源・プロセッサ装置（JMDNコード：34540001）
特定保守管理医療機器 **M-CAM HDカメラ**


【禁忌・禁止】

1. ライトケーブルから出る光を直視しないこと。[目を損傷する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

<本体[標準タイプ]（カメラマウント付き）>

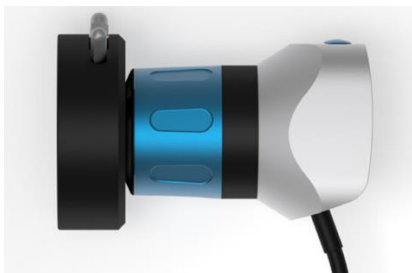

<本体[ZERO タイプ]>



<ライトケーブル>



2. 原材料

アルミニウム、ステンレススチール

3. 電氣的定格

防塵・防水性	IP68（24 時間浸漬）
供給電力	5V / USB 2.0
接続ポート	UBB2.0 または USB3.0

4. 原理

本品に接続した内視鏡の光学画像を処理ユニットによって電子ビデオ画像に処理し、映像を出力する。また、本体に内蔵した光源からライトケーブルを経て内視鏡に光を供給する（光源機能を有していないものもある）。本品は外部電源式である。

【使用目的または効果】

本品は、内視鏡（主としてビデオ内視鏡）とともに使用することを目的とし、光源と処理ユニットの両方の機能を果たす専用の外部電源式装置である。本品は、手術野及び体腔の観察、及びモニタに表示する信号の処理のための電子画像信号の受信の光源となる。

【使用方法等】

1. 本品を内視鏡及び周辺装置に接続する。
2. 本品及び周辺機器の電源を入れる。
3. 本品に接続した内視鏡の光学画像が電子ビデオ画像として出力される。
4. 必要に応じて、露出の調整や静止画の撮影を行う。
5. 必要に応じて、光源からライトケーブルに光を供給する。（ライトケーブルを有する製品のみ）

【使用上の注意】

- ・使用前に、取扱説明書を必ず参照すること。
- ・純正部品のみを使用すること。
- ・改造等を行わないこと。また、社外品によるケーブル等の延長をしないこと。
- ・自ら修理を行わないこと。
- ・本品の電源を入れる前に損傷等がないか確認すること。損傷等がある場合、すぐに本品の使用を中止すること。
- ・本品を振動、落下または衝撃等のストレスにさらさないこと。
- ・使用しない時は本品の電源を切ること。
- ・長時間電源を入れたままにすると本品が熱を持つことがある。
- ・洗浄を実施する際に周辺機器を取り外すこと。
- ・本品は高圧蒸気滅菌をはじめとした滅菌プロセスに対応していない。
- ・洗浄は、適切な医療用洗浄剤を含ませた柔らかい布で付着した汚れ等を拭き取ること。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等を使用しないこと。
- ・洗浄剤には強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤を使用しないこと。
- ・本品を浸漬しないこと。
- ・洗浄後は十分に乾燥させ、濡れたまま使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

取扱説明書に従い実施すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

製造業者：

I.C.LERCHER-Solutions GmbH（ドイツ）

取扱説明書を必ずご参照ください。