

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ (JMDNコード:13695000)

ネックスパックX

再使用禁止


【禁忌・禁止】**

1. 包装が破損していたりあるいは開封されていた場合は使用しないこと。
2. 再使用禁止。
3. ジャガイモでんぷんに対してアレルギーを有することが明らかな患者には使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

<ネックスパック エックス>

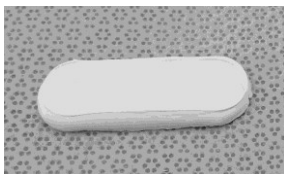

<ネックスパック エックスエル>

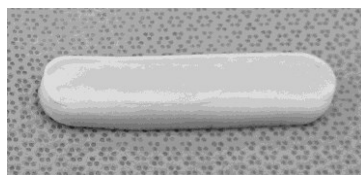

2. 原材料

でんぷん、ヒドロキシエチルセルロース

【使用目的または効果】

本品は、医療用スポンジであり、出血や浮腫を最小限に抑えながら、鼻中隔と鼻腔との間の粘膜を保護し、鼻腔内手術後の自然治癒を促すために用いる。

【使用方法等】*

1. 袋を開封し、無菌操作でNexPak®Xを取り出してください。
2. 必要であれば、留置する患部のサイズに合わせてカットしたり曲げたりします。
3. 縦方向に挿入し、患部に留置してください。
4. 挿入の間に破れてしまったら、サイズが適切かどうか確認してください。
5. 留置した後に、NexPak®Xを生理食塩水等で濡らします。
6. 開封済であれば未使用でも廃棄してください。
7. 医師の判断で、術後毎日続けて水を加えることで、7～10日ほどで鼻の中から取れるようになります。

【使用上の注意】

- ・使用前、包装に異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・使用前に包装に記載されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- ・滅菌包装の開封は使用直前に行い、開封は無菌的操作により行うこと。
- ・使用前は濡らさないよう乾燥させておくこと。
- ・食べたり、吸い込んだりしないこと。
- ・誤嚥しないために、鼻腔の後部には留置しないこと。
- ・本製品は、以前から起こっている、あるいは新たに起こりうる感染症を防ぐような抗菌特性（静菌性）は有していない。
- ・稀に、鼻腔内手術時にパッキング材の有無にかかわらず、黄色ブドウ球菌トキシックショック症候群(TSS)を引き起こす危険性がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れ、直射日光、高温多湿を避け、室温で保管すること。
2. 有効期間
個包装及び外箱に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

製造業者：

Hemostasis LLC（アメリカ合衆国）