

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 一般医療機器
送水吸引チューブ 70355000

MultiCut Solo 吸引チューブセット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

（形状例）

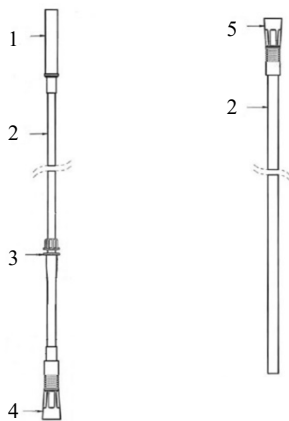

- 1: ハンドピースコネクタ 2: チューブ 3: チューブコネクタ
4: コンテナ上部コネクタ 5: コンテナ下部コネクタ

（原理）

本品は、ローラーポンプに装着し、チューブがしごかれることにより組織や体液等を吸引する。

【使用目的又は効果】

本品は吸引装置と内視鏡用処置具との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) 単回使用製品につき1回限りの使用とする。
- 2) 本品及び本品の包装に破損等の欠陥や開封の跡がないかを確認し、発見した場合は使用しないこと。

2. 使用中

- 1) ローラーポンプのカバーを開く。
- 2) チューブコネクタをローラーポンプの開口部に挟み入れる。
- 3) ローラーポンプのローターを左に回して、チューブを巻き付ける。
- 4) ローラーポンプのカバーを閉じる。
- 5) ローラーポンプ上部から出ているコンテナ上部コネクタをコンテナの上側に接続する。
- 6) コンテナ下部コネクタをコンテナの下側に接続し、チューブの末端を手術室設置の廃水口や市販の廃液タンクに接続する。
- 7) ローラーポンプ下部から出ているハンドピースコネクタをハンドピースの吸引口に接続する。

3. 使用後

使用後はローラーポンプから取り外し、法令に則って適切に廃棄する。

（使用方法等に関連する使用上の注意）

1. 機械的損傷が認められた場合は、いかなる形でも使用しないこと。
2. 包装を開封したら、速やかに使用すること。
3. 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

1. 治療開始前に吸引チューブが正しく接続されていることを確認すること。
2. 本品と吸引装置等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。
3. 本品を装着、使用する際は、チューブを押しつぶしたり、ねじったりしないように注意すること。
4. 本品を逆向きに装着すると、ポンプの吸引側と圧力側が入れ替わり、患者から液が吸引されずに患者に液が入ることになる。処置の前に、チューブが正しく挿入されていることを確認すること。

（不具合・有害事象）

本品は使用に際して、以下のような不具合・有害事象が考えられる。

1. 不具合

- 1) 破損
- 2) 脱落
- 3) 変形

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品の移動や保管に際し、衝突や落下などの機械的衝撃にさらさず、乾燥し清潔で埃のない環境で保管すること。

2. 有効期限

直接の包装に記載のとおり。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
株式会社メディカルリーダース
TEL.03-5803-9271

外国製造業者：
プロメプラ(モナコ)
PROMEPLA S.A.M.