

**2025 年 7 月（第 3 版）
*2024 年 10 月（第 2 版）

承認番号 20600BZZ00666000

医療用品（04）整形用品
高度管理医療機器 吸収性体内固定用ネジ（JMDN コード：16101004）
（吸収性体内固定用プレート JMDN コード：35241004、吸収性体内固定用ピン JMDN コード：32854004、
吸収性体内固定用ワッシャ JMDN コード：36198004）

ネオフィックス

（メッシュプレート・フレキシメッシュプレート・バーホールプレート・ミニスクリュー）

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 併用医療機器
他社の骨接合材との組み合わせで使用しないこと。（相互作用の項参照）
- 使用方法
 - 再使用禁止
 - 再滅菌禁止
 - 顎、オトガイ等大きな荷重やモーメントがかかると予想される部位には使用しないこと。〔吸収性の骨接合材としては高い強度を有するが、金属製骨接合材と比較すると物性は劣る。本品の破損により、不具合や有害事象に至る場合がある〕
 - 関節包内へは適用しないこと。〔分解の進行により分解物が脱落し関節水腫や炎症反応を生じたり、関節面を損傷したりする恐れがある¹⁾〕
 - 骨髄炎、化膿性感染症、その他感染部位へは使用しないこと。〔感染による骨融解等が、本品適用部位及び周辺に生じると、本品分解物の機械的刺激による炎症反応等が発生する恐れがある〕

【形状・構造及び原理等】

- 概要
乳酸重合体（ポリ-L-乳酸(PLLA)）を延伸し、分子の配向を高めた合成吸収性骨片接合材料であり、生体内で分解吸収されるため再手術が不要です。

- 組成
ポリ-L-乳酸（PLLA）
法定色素 緑色 202 号
（ミニスクリューヘッド部に使用）

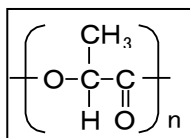


構造式

3. 原理

本品は、加水分解により、強度が徐々に低下します。37℃リン酸緩衝溶液中では、曲げ強度は4～6 ヶ月で初期の 50% となり、7～10 ヶ月ではほぼ失われ、重量は、15 ヶ月後約 90%、25 ヶ月後約 85%、30 ヶ月後約 75% の保持率でした。

PLLA の分解は、表面から溶けるように進むのではなく、全体に徐々に亀裂が入り少しずつ崩壊するように進行していきます（塊状分解²⁾）。生体内では、使用部位や使用状況等により異なりますが、約 3 年～数年で吸収され消失する^{3) - 5)} との報告があります。

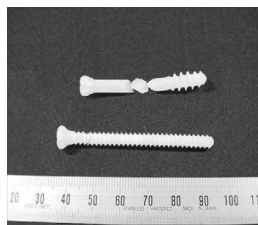

10 ヶ月後




30 ヶ月後

4. 形状


本添付文書に該当する製品の種類、サイズ等については包装表示ラベルに記載しています。

『メッシュプレート・フレキシメッシュプレート・バーホールプレート』

代表的な形状

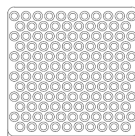

メッシュプレート
孔径：φ 2.3 mm

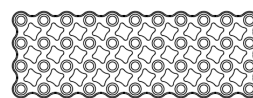

フレキシメッシュプレート
孔径：φ 2.3 mm




バーホールプレート
孔径：φ 2.3 mm


『ミニスクリュー』

<φ 2.2>

ネジ山径：2.2 mm、ネジ谷径：1.7 mm、
（応急用についてはネジ山径 2.3 mm、その他は同サイズ）

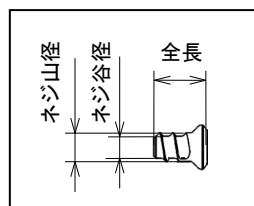

全長：4 mm

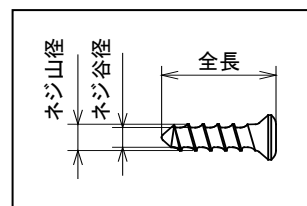

全長：5～10 mm

本添付文書に記載の本品には、【使用目的又は効果】に記載の構成補助具（ステンレス：キルシュナー鋼線）付きの種類は、ありません。

【使用目的又は効果】

- 本体（ポリ-L-乳酸）
骨の接合および固定に使用する。
- 構成補助具（ステンレス：キルシュナー鋼線）
骨の貫通による本体の挿入補助


本品は以下の症例に使用して下さい。

- 骨接合術における海綿骨および一部の皮質骨の固定
- 骨移植術における移植骨の固定
- 骨切り術における骨片の固定

【使用方法等】

1. 具体的な使用方法

- (1) 骨接合部を整復し、必要に応じて骨把持器などで仮固定をして下さい。
- (2) 使用部位に応じ、適切なサイズのプレートとミニスクリューを選択して下さい。必要に応じて、専用のベンダー（グンゼサージカルツール ヒートベンダー（医療機器届出番号 13B1X00180G00011、26B1X00010000022）またはグンゼサージカルツール 加温ベンディング用把持器（医療機器届出番号 13B1X00180G00023、26B1X00010000039））を用いてプレートを加温し、適切な形にカットして下さい。また、専用のベンダーを用いて骨面に沿うようにプレートを変形させて下さい。
- (3) プレートの穴の間隔に合致するように、ミニスクリューに対応した専用のドリルを用いて適切な下穴を必要数あけて下さい。
- (4) 骨孔内を十分に洗浄したのち、専用のタップを用いて骨孔にネジ溝を切して下さい。
- (5) 再度骨孔内を十分に洗浄したのち、プレートを骨面に配置して下さい。
- (6) 専用のトルクドライバーを用いてプレートの穴からミニスクリューを挿入し、トルクドライバーが空転するまでプレートを固定して下さい。
- (7) プレートをミニスクリューで固定せずに縫合糸等により固定場合があります。

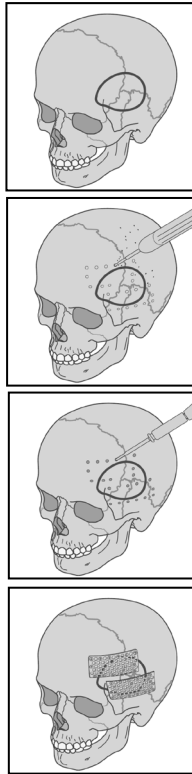


2. 使用方法等に関連する使用上の注意


- (1) ミニスクリューは、必ずプレートと併用して使用して下さい。
- (2) プレート・ミニスクリューは、使用する部位に応じて適正な種類及びサイズを使用して下さい。
- (3) 使用するプレート・ミニスクリュー及び部位に応じて、専用の手術器具を用いて適切な深さまでドリリング及びタッピングを行って下さい。[用いなかった場合は、プレートが正しく固定できず骨癒合不全の原因となります。ドリリング及びタッピングにおいて、骨孔が浅すぎると本品が完全に挿入できない、また、無理な挿入を続けると本品が破損する場合があります] なお、手術器具は同梱されていません。
- (4) ドリリング及びタッピングを行う際は、周囲の血管や神経組織を傷つけないように、慎重に操作を行って下さい。
- (5) ミニスクリューはセルフタッピングできません。必ず専用のタップを用いて、骨に最後までタップを切して下さい。またタップを切った後は、切り屑が残らないように骨孔を十分に洗浄して下さい。[タップを切った後、切り屑が骨孔に残存すると、スクリュー挿入時に摩擦が生じ、その状態で無理にねじ込むと本品が破損し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります]

- (6) 本品に過度のトルクや強い圧迫力をかけないで下さい。[本品にそのような扱いをすると破損、損傷し、不具合や有害事象に至る場合があります]
- (7) 本品は金属に比べ軟らかく傷つきやすいため、術具等で破損、損傷させる可能性がある操作は行わないで下さい。また術具等で破損、損傷した本品は使用しないで下さい。[破損、損傷した本品の使用は、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります]
- (8) プレートは、フラット型ミニスクリューと併用しないで下さい。
- (9) 全長 4 mm のミニスクリューは、メッシュプレート、フレキシメッシュプレート、バーホールプレート、薄型ミニプレート（厚み 1.0 mm）と併用して下さい。ミニプレート（厚み 1.5 mm）及びフラット型ミニプレート（厚み 0.95 mm）とは併用しないで下さい。
- (10) バーホールプレートはカットしないで下さい。[本品にヒビが入ったり、破損する恐れがあります]
- (11) メッシュプレート、フレキシメッシュプレートは、必要に応じて、骨面に沿うようにカットして下さい。メッシュプレート、フレキシメッシュプレートをカットする場合は、専用のベンダー（グンゼサージカルツール ヒートベンダー（医療機器届出番号 13B1X00180G00011、26B1X00010000022）またはグンゼサージカルツール 加温ベンディング用把持器（医療機器届出番号 13B1X00180G00023、26B1X00010000039））を用いて十分に加温した後に行ってください。その際は、火傷に充分注意して下さい。プレートが冷えた場合はカットを中止し、再度加温して下さい。[本品が冷えた状態でカットすると、本品にヒビが入り、強度が低下したり、切断面が鋭利な状態になり患部を損傷するなどの原因となります] バリなど鋭利となった部分は角を落とすなど適切に処置して下さい。また、ミニスクリューを挿入するプレート上の穴や座繰（ざぐり）を傷つけないよう充分注意して下さい。座繰が破損した場合は、新しいプレートと交換して下さい。
- (12) プレートを曲げる場合は、専用のベンダーを用いて十分に加温した後に行ってください。その際は、火傷に充分注意して下さい。プレートが冷えた場合は曲げを中止し、再度加温して下さい。[加温が不十分な状態で曲げると強度が落ち、本品が破損、損傷し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります。また、加温することによりベンディング後の製品形状の後戻りを最小限に抑えることが出来ます]
- (13) プレートを曲げた場合は、曲げにより変形した穴を使用し固定しないで下さい。[変形した穴にスクリューが挿入できない、または挿入がきつくなる等、本品の性能が十分に発揮できなくなり、プレートの破損、損傷につながります]
- (14) 極力骨面に沿うようにプレートを固定して下さい。[プレートと骨面の間に隙間がある状態で固定すると、本品が破損、損傷する恐れがあります]
- (15) プレートを加温して曲げる際の可能な繰り返し曲げ回数は 10 回までです。

- (16) プレートの片面にはミニスクリュー首下部に沿うように座繰が入っていますので、使用する際は本品の裏表を確認して使用して下さい。また、座繰面にスクリューの首下部がちょうど収まるよう確認して下さい。【正しく配置しないと本品が破損し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります】

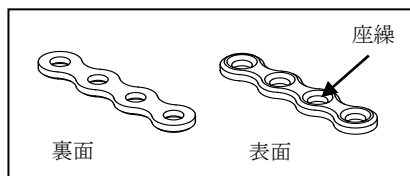

- (17) プレートが骨面に正しく配置できない部位やミニスクリューが骨面に対して垂直方向から大きくずれて挿入される部位には使用しないで下さい。【正しく配置しないと本品が破損し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります】

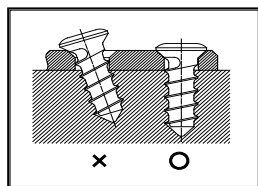

- (18) ドリルで骨に穴をあける際、1つの穴に2回以上ドリルを挿入しないで下さい。また骨に挿入したまま必要以上にドリルを回転させないで下さい。【穴径が大きくなり、本品による固定では不十分になり、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります】
- (19) プレートの固定は、可能な限り複数穴で行って下さい。【片側1穴のみの固定では、固定力が低下することがあります。本品が破損し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります】
- (20) 骨片を長いプレートの両端のみで支持するなど、本品に過剰な負荷がかかると予想される固定は行わないで下さい。【本品に過剰な負荷がかかると本品が破損し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります】
- (21) 本品だけでは固定性が不十分であると考えられる場合には、顎間固定や骨把持器またはキルシュナー鋼線等での仮固定をして下さい。【負荷により、本品が破損、損傷し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります】
- (22) メッシュプレート及びフレキシメッシュプレートは、スクリューホール1列幅では使用せず、必ず2列幅以上で使用して下さい。【負荷により本品が破損、損傷し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります】
- (23) 必要に応じて、治癒するまでの期間（2～4週間以上）、金属材料等による補助的な固定をし、転位やズレの防止を図って下さい。メッシュプレート（厚み 0.6mm 品）及びフレキシメッシュプレート（厚み 0.6mm 品）を上顎に使用する場合は、必ず補助的な固定を行い、転位やズレの防止を図って下さい。【大きな荷重のかかる部位で補助固定を行わないと、本品が破損し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります】
- (24) ポリ-L-乳酸（PLLA）がX線では透見できないことを考慮に入れて使用して下さい。
- (25) 部位によっては十分な接合が得られなかったり、炎症性組織反応が生じる可能性があります。骨接合に本品を使用する場合、本品の特性を充分理解の上、使用して下さい。遅発性無腐性腫瘍が発生した場合には腫瘍の摘出手術を行って下さい。

- (26) ミニスクリューの挿抜を複数回、繰り返さないで下さい。【負荷により、ミニスクリューの破損、損傷等の原因となります】
- (27) ミニスクリューの十字溝に専用のドライバーを差し込む際は、十字溝とドライバーの先端を慎重に合わせて下さい。【十字溝とずれた状態でドライバーの先端をミニスクリューヘッドに当たると、十字溝が損傷し、ドライバーの先端が十字溝に挿入できなくなります】
- (28) ミニスクリューを専用ドライバーで挿入する際は、スクリューヘッド面に対してドライバーを垂直な状態にしてドライバーを回して下さい。【スクリューヘッド面に対してドライバーが垂直ではない状態で回すと、ミニスクリューの損傷、破損等の原因となります】

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - (1) アレルギー体質を有し本品との関連が予想される患者への適用に際しては充分考慮して使用の適否を決定して下さい。
 - (2) 骨粗鬆の患者や、全身的な合併症、衰弱等により骨癒合を遅れさせるような状態にある患者への適用に際しては、本品の特性を充分考慮して使用の適否を決定して下さい。【固定が不十分となったり、治癒するまでに本品が吸収され本来の機能を失う恐れがあります】
 - (3) プラキシズムの見られる患者に本品を適用する際は、十分な骨癒合が得られるまでの期間（2～4週間以上）、十分な補助固定を行って下さい。【不十分な場合は、本品が破損し、骨癒合不全・骨固定性不全等の原因となります】
2. 重要な基本的注意
 - (1) 骨癒合に3ヵ月間以上を要する部位には使用しないで下さい。【本品は分解吸収性であり、分解とともに徐々に強度が低下するので十分な固定力を維持できず、不具合や有害事象に至る場合があります】
 - (2) ミニスクリューの挿入時にきしみ音が大きくなったり、過剰なトルクを感じた場合は、直ちに挿入を中止し、抜去して下さい。再度タッピングを行い、骨孔を大きくしてから、再洗浄及び再挿入をして下さい。【ミニスクリュー挿入時にきしみが発生し、無理な負荷がかかると、十分な固定が得られなかったり、本品が破損することがあり、骨癒合が得られなくなる恐れがあります⁶⁾】
 - (3) 術後感染を生じた場合の処置としては、本品を除去した後、デブリドマンを行って下さい。【完全に除去しないと、感染による骨融解等により、本品分解物の機械的刺激による炎症反応が発生する恐れがあります】
 - (4) 本品の過剰量の使用は避けて下さい。【局所に過剰量を使用すると、吸収過程で一過性の腫脹等の炎症反応が発生する恐れがあります】

3. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

【併用禁忌】（併用しないこと）

医療機器 の名称	臨床症状・ 措置方法	機序・危険因子等
他社の プレート	本品のミニス クリューで他 社のプレート を固定しない こと	（機序・危険因子） ・サイズが完全に合致しないた め、固定が不十分になる恐れ がある。 ・スクリューとプレートで分解 速度が異なる可能性がある。 （発生の可能性がある有害事 象） 破損、損傷、緩みによる骨癒合 不全、骨固定性不全、遷延治癒、 偽関節
他社の スクリュー	他社のスクリ ューで本品の プレートを固 定しないこと	

4. 不具合・有害事象

(1) その他の不具合

- 本品の折損、破損等

(2) その他の有害事象

- 一過性の疼痛・腫脹⁷⁾。
- 遅発性無腐性腫瘍⁸⁾。
- 軽度の一過性骨吸収⁹⁾。
- 骨癒合不全、骨固定性不全。
- 本品破損による骨癒合不全、遷延治癒、偽関節。
- 血流の少ない部位や皮膚に近い部位に使用した場合におい
ての吸収の遅延、機械的刺激に伴う本品突出や炎症反応、
及び分解物貯留による局所的 pH の低下とそれに伴う炎症
反応。
- 本品挿入時の過負荷による母床骨や移植骨の損傷。
- アレルギー性炎症反応。
- 骨癒合を遅れさせるような状態にある患者に本品を使用し
た場合における、吸収の遅延、機械的刺激に伴う本品突出
や炎症反応、および分解物貯留による局所的 pH の低下と
それに伴う炎症反応。
- 本品の使用部位またはその周辺において生じる本品に起因
しない感染。

5. 高齢者への適用

高齢患者への適用に際しては、充分考慮して使用の適否を決定
して下さい。【骨癒合を遅れさせるような患者に該当する可能性が
あります】

6. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

(1) 妊婦、産婦、授乳婦への適用

妊婦、産婦、授乳婦もしくは妊娠している可能性のある患者
への適用に際しては、充分考慮して使用の適否を決定して下
さい。【安全性が確立していません】

(2) 小児への適用

- 小児に本品を適用する際、医師の指示を守れない場合や固
定性に不安がある場合は、十分な骨癒合が得られるまでの
期間、十分な外固定を行って下さい。【不十分な場合は、
本品のダメージや破損を来し、骨癒合不全・骨固定性不全
等の原因となります】
- 成長期の患者の成長軟骨板を貫く部位には使用しないで下
さい。【十分な知見が得られていません】

【臨床成績】

1991 年 8 月から 1992 年 12 月までの期間に肋骨離断を必要とす
る外科手術において肋骨再結合を目的とした 66 症例に対して実
施されました。有用性については、「極めて有用」が 42 例、「有
用」が 24 例、「有用とは思わない」が 0 例でした^{10) - 12)}。

頭蓋顎顔面領域では全国 6 施設において、頬骨骨折、眼窩床骨折、
下顎骨骨折、上下顎骨切り、頭蓋縫合早期癒合症の合計 57 例に
対して、本品の効果を調べたところ、「良好」が 54 例、「やや良
好」が 1 例、「不良」が 2 例でした¹³⁾。

また、1994 年 7 月より 2004 年 6 月までに使用された 662 症例の
使用成績調査結果において、オートガイ及び下顎枝矢状分割におけ
る固定時に使用したミニスクリューの破損が 1 例発生しました。
その他、本品が原因とされる副作用、不具合、有害事象は認めら
れませんでした。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 包装にきずや破れが生じないように、取扱い及び保管に注意
して下さい。【きずや破れは、本品の品質に異常を来し、正
常な機能を発揮させなくする恐れがあります】
- (2) 本品は、高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔
な場所で保管して下さい。【不適切な保管は、本品の品質に
異常を来し、正常な機能を発揮させなくする恐れがあります】

2. 有効期間

本品の使用有効期間は製造日より 6 年です。【自己認証(当社デ
ータ)による】

それぞれのパッケージに使用期限の表示があります。

【主要文献及び文献請求先】*

1. 主要文献

- 1) D. A. McGuire, F. A. Barber, B. F. Elrod, and L. E. Paulos,
Bioabsorbable interference screws for graft fixation in anterior
cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy, 15, 463-473
(1999).
- 2) 辻秀人、筏義人共著、「ポリ乳酸」、高分子刊行会、1997、21-22.
- 3) Y. Matsusue, S. Hanafusa, T. Yamamuro, Y. Shikinami, and Y.
Ikada, Tissue reaction of bioabsorbable ultra high strength poly
(L-lactide) rod: A long-term study in rabbits. Clin. Orthop., 317,
246-253 (1995).
- 4) R. Suuronen, T. Pohjonen, J. Hietanen, and C. Lindqvist, A 5-year
in vitro and in vivo study of the biodegradation of polylactide
plates. J. Oral Maxillofac. Surg., 56, 604-614 (1998).
- 5) 松末吉隆、飯田寛和、中村孝志、ポリ-L-乳酸 (PLLA) 骨接
合材の 4-9 年の成績: X 線学的検討を中心に、骨折、20、
308-311 (1998).
- 6) T. Takizawa, S. Akizuki, H. Horiuchi, and Y. Yasukawa, Foreign
body gonitis caused by a broken poly-L-lactic acid screw.
Arthroscopy, 14, 329-330 (1998).
- 7) 吉野信之、山村成載、松井英司、中村紳一郎、渡部欣忍、鎌
田圭司、辻吉郎、野口昌彦、平澤泰介、ポリ-L-乳酸ピンを
用いた距骨骨折の治療、骨折、20、324-328 (1998).
- 8) 森本守、杉本和也、岩井誠、高倉義典、ポリ-L-乳酸スクリ
ューにより生じた無腐性腫瘍の 1 例、整形外科、51、327-329
(2000) .

- 9)Y. Matsusue, T. Nakamura, H. Iida, and K. Shimizu, A long-term clinical study on drawn poly-L-lactide implants in orthopaedic surgery. J. Long Term Eff. Med. Implants, 7, 119-137 (1997).
- 10)辰巳明利、花岡伸治、寺町政美、山本恭通、中村隆澄、北村文夫、宮本信昭、島本偉志、ポリ L 乳酸 (P-L-LA) 肋骨接合ピンの胸部心臓血管外科への臨床成績について、基礎と臨床、27、4859-4867 (1993).
- 11)桑原正喜、糸井和美、松岡勝成、高田哲也、中村達雄、清水慶彦、高分子材料人工骨 (PLA 肋骨ピン) の開胸手術における応用、日呼外会誌、8、19-23 (1994).
- 12)A. Tatsumi, N. Kanemitsu, T. Nakamura, and Y. Shimizu, Bioabsorbable Poly-L-Lactide Costal Coaptation Pins and Their Clinical Application in Thoracotomy. Ann Thorac Surg, 67, 765-768 (1999).
- 13)小林正弘、中島龍夫、中西雄二、中北信昭、上石弘、平野明善、吉村陽子、頭蓋顎顔面領域における吸収性ミニプレートの使用経験、形成外科、47、1079-1088 (2004)

2. 文献請求先

ゲンゼメディカル株式会社
TEL 06-4796-3151

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：ゲンゼメディカル株式会社