


機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒（JMDNコード: 13929001）
Tulip 注射筒（A）

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 組成
ポリプロピレン、エラストマー

2. 形状
代表的な形状を示す。
注射筒

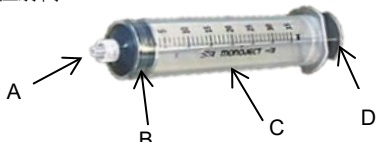

	名称
A	アダプタ
B	ガスケット
C	外筒
D	プランジャー

3. 容量
注射筒: 1, 3, 10, 12, 20, 60CC

4. 原理
吸引針や注入針等を接続し、体内の液状部分の引き抜きや医薬品等を注入する。

【使用目的又は効果】

本品は、吸引針や注入針を接続し、体内の液状部分の引き抜きや医薬品などの注入に使用する。

【使用方法等】

1. 使用前
本品を包装から取り出し、施設にて検証された EOG 滅菌条件で滅菌を行う。
2. 使用方法
吸引針や注入針等と接合し、使用する。
3. 使用方法等に関連する使用上の注意
- 1) 吸引針や注入針等と確実に接続していることを確認し、使用すること。
 - 2) 注射針の装着は無理な力をかけないこと。
 - 3) 本品に強い力を加えないよう注意すること。[破損する可能性がある]
 - 4) 接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないこと。
 - 5) 接続部に薬液又は血液を付着させないこと。[接続部の緩み等が生じる可能性がある]
 - 6) コネクター等と接続する際、アダプタに横方向の力を加えないこと。[アダプタの湾曲や破損等が生じる可能性がある]
 - 7) コネクターを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[コネクターが外れなくなる又は、コネクターが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入が生じる可能性がある]

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品は再使用禁止である。
2. 本品は未滅菌品であるので、使用に際しては必ず洗浄・EOG 滅菌を行ってから使用すること。[未滅菌のまま使用すると感染症を引き起こす危険性がある]
3. 外筒印刷部の目盛を越えてプランジャーを引かないこと。[プランジャーが外筒から抜けて液漏れ、空気混入が生じる可能性がある]
4. ルアーロックがはずれたり、緩んでいる場合は、確実に固定すること。
5. ガスケットに針等で傷をつけないこと。[破損が生じ、液漏れ、空気混入及び摺動抵抗の増加が生じる可能性がある]

6. 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないように、さらに、はさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。[液漏れ、空気混入や破損が生じる可能性がある]
7. 外筒部を強く握る等、圧迫するような負荷を加えないこと。[圧迫によりガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れや空気混入が生じる可能性がある]
8. 外筒印刷部をこすったり、あるいは薬液がついた状態で放置しないこと。[目盛等の印刷部が消える可能性がある]
9. プランジャーはまっすぐ引くこと。[斜めに引くと、ガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気混入又はガスケットの外れが生じる可能性がある]
10. 運搬・操作時には、振動や衝撃に注意すること。
11. 低温下での衝撃で破損する危険があるため、低温時の取り扱いに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：グンゼメディカル株式会社

電話番号：06-4796-3151

製造業者：Tulip Medical Products, Inc.

チューリップ メディカル プロダクツ インク
(アメリカ合衆国)