

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 歯科用 X 線ビームアラインメント装置 31828000


DentalSCOPE インジケーター(臼歯部用)

【禁忌・禁止】

1. 本品に不具合（変形、破損、ヒビ、キズ等）がある場合は使用してはいけません。
2. 本品に汚染が疑われる場合は、使用してはいけません。
3. 本品に対し、熱を加える滅菌（乾熱滅菌や高圧蒸気滅菌（オートクレーブ滅菌））は行わない。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

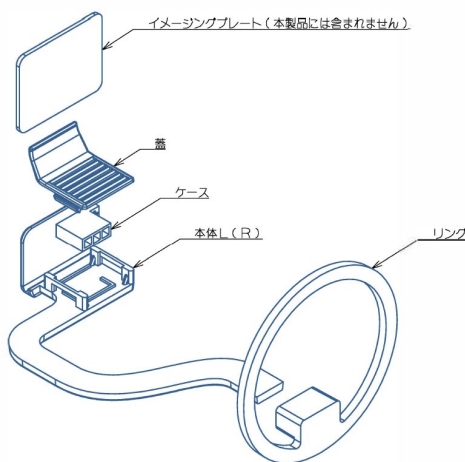

2. 原理

- ① 本体に歯科用 X 線フィルムまたはイメージングプレートを装着し、蓋を歯で軽く噛むことで歯科用 X 線フィルムまたはイメージングプレートを保持することができます。
- ② リングに X 線装置のコーン部を合わせることで口内撮影の際の X 線照射位置合わせを行うことができます。
- ③ 手で押さえる必要がないため、撮影部以外の X 線被曝を避けることができます。
- ④ 撮影した X 線写真に参照体が投影される。参照体の濃度値に基づき、ソフトウェア等で解析、補正等することにより、X 線撮影条件の比較ができる。

【使用目的又は効果】

歯科 X 線撮影時に、歯科用 X 線フィルムまたはイメージングプレートを、フィルムホルダーに挟み、患者の口腔内に挿入すると共に、本体の凹凸部を噛むことにより、歯科用 X 線フィルムまたはイメージングプレートを適切な位置に支持及び配置する。リングを使用することにより、X 線管を歯科用 X 線フィルムまたはイメージングプレートに対して適切な位置に合わせることができる。

【使用方法等】

1. 使用前に必ず、変形、破損、ヒビ、キズ等がないか確認する。
2. 汚染が疑われる場合は、洗浄、滅菌を行うこと。
但し、本品に対し、熱を加える滅菌（乾熱滅菌や高圧蒸気滅菌（オートクレーブ滅菌））は行わないこと。
3. 歯科用 X 線フィルムまたはイメージングプレートの感光面をリングのある側に向けて装着する。

4. 蓋の凹凸を歯で軽く噛んで保持し、リングに X 線装置のコーン部を水平に合わせ、照射位置を合わせる。
手で保持することなく容易に歯科用 X 線フィルムまたはイメージングプレートの位置決め及び X 線照射位置を合わせることができる。

【使用上の注意】

1. 弊社指定の付属品を使用すること。
2. 使用済みの本品を廃棄する場合は、病院の廃棄物処理規則に従うこと。
3. 本品の使用は医療従事者のみに限る。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管及び設置
高温多湿を避け、また、歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
2. 使用期限
変形や破損、キズがある場合は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名称：メディア株式会社
TEL：03-5684-2510