

機械器具(09) 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器、 一般的名称 : 全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具 JMDN 40902000

治療計画用フラット天板

【禁忌・禁止】

次の場合には適用しないこと


- ・ 治療計画以外の目的では使用しないこと。
- ・ 最大 150 kg (330 ポンド) 以上の体重の患者には本品を使用しないでください。
- ・ 検査目的以外で、患者の体位を動かさないでください。
- ・ 安全な使用を制限する可能性がある明らかな欠陥があるときは使用しないでください。

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は、治療計画の際に、患者を載せる台として用いる。

2. 構成品

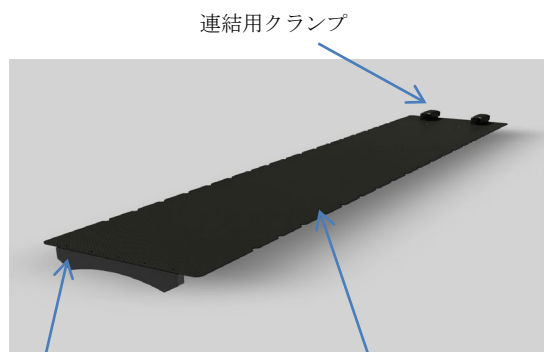

位置固定用先端クリップ

カーボンフラット天板本体

寸法：

- ・ 全長 264cm (最大値)
- ・ 幅 (奥行き) 53cm
- ・ 高さ 12.9cm
- ・ 重量 : 15.4kg

【使用目的・効能又は効果】

本品は、治療計画の際に、患者を載せる台として用いる。

【品目仕様等】

- ・ 積載方法：患者を以下の寸法内で載せることができる。

全長：264 cm

幅：53 cm

【操作方法又は使用方法等】

(1) 使用前点検

- ・ 目視にて本品の損傷がないか点検する。
- ・ 先端リップ部分にがたつきが無いかを点検する。
- ・ 後端連結用クランプのネジ切れが無いかを目視点検及び、実際に固定ハンドルを回し、異常が無いかどうかの点検を実施する。

- ・ 表面の保護塗装にはがれや毛羽立ちが無いかを点検する。

(2) 使用方法


<1> 寝台上部へ本品を搭載し、先端リップ部分を寝台天板へ差し入れる。

<2> 本品後端にある、連結用クランプを寝台ハンドルへ取付、固定ハンドルを時計方向に回し、緩みの無いように固定する。

<3> 本品全体を揺すり、がたつきや緩みによる位置変化が無いかを確認する。



位置固定用先端リップ
(差込部分)

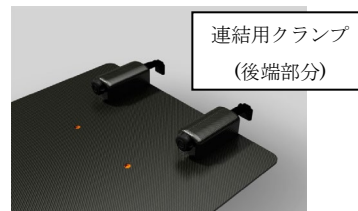

連結用クランプ
(後端部分)

【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず点検を行うこと。
- ・ 本品にクラック (亀裂) がないことを確認すること。
- ・ 身体以外の荷重物を本品へ載せないこと。
- ・ 連結用クランプ部分を分解しないこと。
- ・ 無理な力や局所集中する荷重を本品へ加えないこと。
- ・ 装置寝台への本品の取り付けを確実にすること。
- ・ 身体積載に支障のきたすような個所の加工や改造は行わないこと。
- ・ 検査時、患者体外の装飾品は全て取り外してから使用すること。
- ・ 滅菌装置 (紫外線灯を含む) へは入れないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光 (紫外線灯を含む)、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (4) 本品は次回の使用に支障のないように必ず清潔にしておくこと。

【取扱い上の事項】

- (1) 本品が故障した場合は、「使用禁止」等適切な表示を実施し、修理は専門技術者に依頼すること。
- (2) 本品は改造しないこと。

取り扱い説明書を必ずご参照下さい。

(3)本品を廃棄する場合は「廃棄物処理に関する法律」に従い適切に処理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に、汚れや破損、変形を点検する。

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 : メディカル・エクスパート株式会社
住 所 : 東京都中央区新川 2-30-11 新川 OMK ビル
電 話 番 号 : 03-3523-6253
F A X 番 号 : 03-3523-6254
お問い合わせ先 : メディカル・エクスパート株式会社
電話 : 03-3523-6253
FAX : 03-3523-6254

製造業者名 : パーテックス株式会社

販売店

取り扱い説明書を必ずご参照下さい。