

機械器具(09) 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器、 一般的名称 : 全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具 JMDN 40902000

血管造影用延長天板 White

**【禁忌・禁止】

次の場合には適用しないこと

- ・ 100 kg 以上の体重の患者への使用はしないこと。
- ・ 延長天板部において心肺蘇生術は行わないこと。
- ・ 寝台取付クランプ部分を分解しないこと。
- ・ 安全な使用を制限する可能性がある明らかな欠陥があるときは使用しないでください。
- ・ 本品取付および使用に際して異常を感じた場合は、すぐに使用を停止すること。
- ・ 本品を使用しない症例の際は、必ず寝台から取り外し保管すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は、寝台の上に載せ、寝台両脇のアクセサリールに取り付けて使用する。

2. 構成品



寸法：

- ・ 全長 : 1910 mm
- ・ 幅 : 680 mm
- ・ 高さ : 63.5 mm
- ・ 重量 : 20.0 kg

【使用目的又は効果】

画像診断、インターベンショナル法の場合に、患者寝台に取り付け、患者寝台を延長することにより、全身を適切に位置決めするために用いられる。

【使用方法等】

(1) 使用前点検

- ・ 目視にて本品のクラック(亀裂)、変形等がなく滑らかであることを確認する。
- ・ 延長天板部と取付クランプ部のネジが緩んでいないか確認する。
- ・ 固定ノブのネジ部に破損が無く、ネジがスムーズに回る事を確認する。
- ・ 本体表面の保護塗装にはがれや毛羽立ちが無いか、目視にて確認する。

(2) 使用方法

<1> 寝台取付クランプ左右の 4 ヶ所の固定ノブを緩める(図 1 参照)。また、抜け止め防止用フックが上がっている場合、水平位置まで戻しておく。

<2> 画像診断装置用患者寝台の上に本品を載せ、後端方向へスライドさせて寝台両脇のアクセサリールへ寝台取付クランプを挿し入れる。

<3> 患者寝台挿し込み口に寝台先端部を確実に入れ、奥まで確実に挿し込む(図 2 参照)。

<4> 寝台取付クランプ固定ノブを締める。

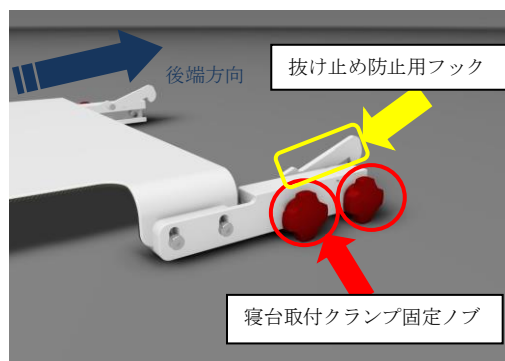


図 1. クランプ固定ノブ概要図

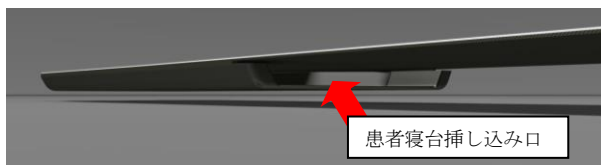


図 2. 取付位置概要図

【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず点検を行うこと。
- ・ 患者寝台に、確実に取り付け、固定すること。
- ・ 100 kg 以上の体重の患者への使用はしないこと。
- ・ 本品取付の際、寝台と天板の隙間に指を挟み込まないよう注意すること。
- ・ 患者を寝台に載せる際は、寝台を後端部(脚側)末端へ引き入れた状態で行うこと。

取り扱い説明書を必ずご参照下さい。

- ・延長天板部において心肺蘇生術は行わないこと。
- ・寝台取付クランプ部分を分解しないこと。
- ・チルト機能を使用しないこと。
- ・本品取付 / 使用に際して異常を感じた場合は、すぐに使用を停止すること。
- ・ネジの締め忘れに十分注意すること。
- ・紫外線灯下では使用しないこと。
- ・本品にクラック(亀裂)がないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光(紫外線灯を含む)、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (4) 本品は次回の使用に支障のないように必ず清潔にしておくこと。

【取扱い上の事項】

- (1) 本品が故障した場合は、「使用禁止」等適切な表示を実施し、修理は専門技術者に依頼すること。
- (2) 本品は改造しないこと。
- (3) 本品を廃棄する場合は「廃棄物処理に関する法律」に従い適切に処理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に、汚れや破損、変形を点検する。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 : メディカル・エキスパート株式会社
住 所 : 東京都中央区新川 2-30-11 新川 OMK ビル
電 話 番 号 : 03-3523-6253
F A X 番 号 : 03-3523-6254
お問い合わせ先 : メディカル・エキスパート株式会社
電話 : 03-3523-6253
FAX : 03-3523-6254

*製造業者名 : パーテックス株式会社