

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止。
- ・ 固定が完了するまで、患部を無理に動かしたり負担をかけたりしないこと。
- ・ 使用に当たって適切な水温の維持に留意すること。
- ・ 本品に対してアレルギー反応を示す患者、皮膚過敏症の患者には適用しないこと。
- ・ 患部に感染のある患者には適用しないこと。
- ・ 開放性の創傷のある患者には適用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】

本品は、ポリウレタン樹脂を染みこませたパッドを、親水性のメッシュと疎水性の不織布で包み込んだ成型型副木で、ポリウレタン樹脂が水分を含んで硬化する性質を利用して患部を固定します。本品はロールタイプとなっていますので、使用時に適用する患部に応じて適当な長さに切断して使用します。



本品はロール状のものが一巻として防湿袋に封入されています。次の種類があります。



商品コード	規格(幅×長さ)/1箱
TRS-001B	2.5 cm × 4.5m / 箱
TRS-002B	5.0 cm × 4.5m / 箱
TRS-003B	7.5 cm × 4.5m / 箱
TRS-004B	10.0 cm × 4.5m / 箱
TRS-005B	12.5 cm × 4.5m / 箱

【使用目的又は効果】


骨折、捻挫、挫傷時の四肢の固定に使用します

【使用方法等】


1. 本品を使用する際は手術用の手袋を着用して下さい。
2. 本品はロールタイプですので、使用時に患部の状態に合わせて適当なサイズにカットして使用します。必要な分をカットして取り出した後、残りは防湿袋に納め、付属のクリップでしっかり密封してください。

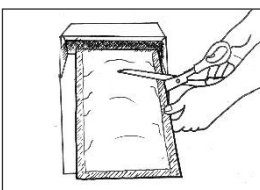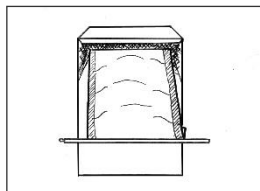


3. 本品の緑色のメッシュパッド側をスプレー等を使って18～22℃の水で湿らせて下さい。
※水道蛇口又は容器等から水分を加えることもできます。

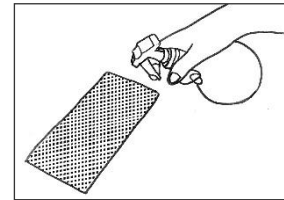

4. 布地等でメッシュパッド側を押さえて余分な水分を拭き取って下さい。スプリントは絞らなくても自然に滴が出ます。水分が多すぎると措置に時間がかかります。

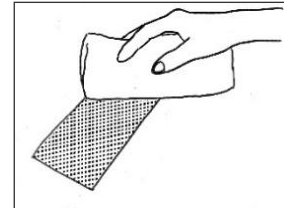

5. 伸縮自在な包帯で本品の白い方を内側にして患部に適用してください。副木が安定するまで(3～5分)に適当な形に設定してください。

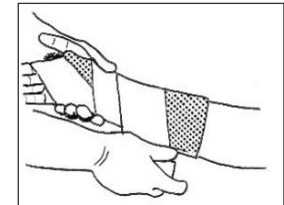

6. 施術後 20 分間は患部を動かしたり負荷をかけたりしないようにして、固定が完了するのを待ちます。

【使用上の注意】

1. 包装に破損等が認められる場合は使用しないで下さい。
2. 本品は温めると接着しやすくなりますので、加熱による不用意な接着に注意して下さい。
3. 18℃以下または 22℃以上の水に浸けると、本品の効果が十分に発揮されないことがあります。
4. 本品を装着した時、発熱による不快感が生じる場合は使用を中止して下さい。
5. 本品の患部への適用時に、包帯をきつく巻きすぎないようにして下さい。血行障害等を生じさせるおそれがあります。
6. 本品の使用中に、発赤、かぶれ、痛み等の症状が生じる場合は、ただちに使用を中止して下さい。
7. 本品が固定の途中で破損した場合は、ただちに使用を中止して下さい。
8. 一度開封し使用せずにクリップで密封保管したものは、使用期間に関わりなく早めに使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 水濡れに注意し、直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること。

有効期間

- ・ 包装に記載した有効期間参照。
(適切な貯蔵方法で、製造から 3 年以内)

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社メディカルインクス
福岡県大野城市川久保 1-17-13
TEL 092-513-0050

製造業者：TOMATO M&C CO., LTD. (大韓民国)