


機械器具 (02) 医療用照明器
一般医療機器 汎用光源 JMDN:32037000
ドクタースコープ LED ライト No.17 & No.18

【禁忌・禁止】

- 1) 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
- 2) LED ライトを直視しないようにして下さい。
- 3) 長時間使用時にライト部分が発熱することがあるので注意して下さい。

【形状・構造】

本品の形状・構造は次のとおり。

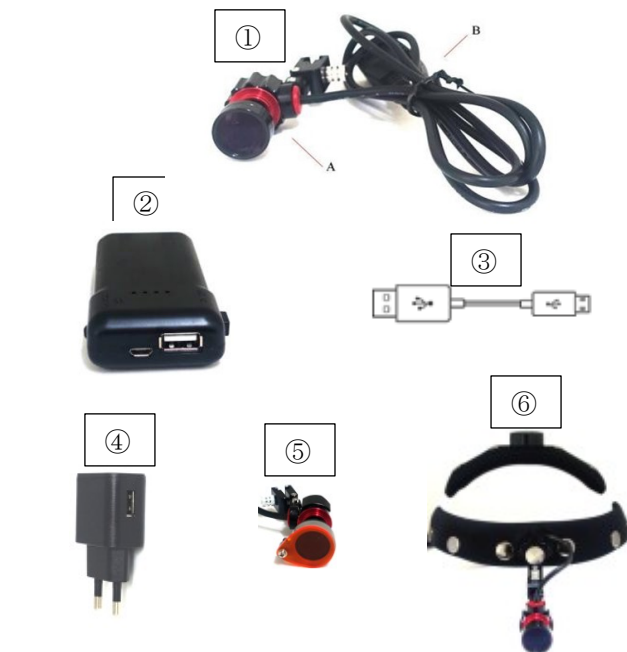

- ① モジュール
- ② バッテリー
- ③ USB コネクター
- ④ チャージャー (コンセント接続用)
- ⑤ UV カットフィルター
- ⑥ ヘッドバンド (オプション品)

【原理】

本品は、バッテリー装置からモジュール先端部にある LED ライトに電源を供給し、ライトを点灯させ、手術時の作業野を照明する。

【使用目的又は効果】

本品は、手術時に視野を直接照明し、手術の能率を改善するために用いる。

【性能及び安全性に関する規格】

本品は LED ライトの色温度等によって 4 種類のモジュールがある。バッテリー、充電器及びモジュールの性能は次のとおり。

1. バッテリー

重 量 : 117g
充電回数 : 500 回
充電時間 : 約 4 時間半
容 量 : 5,200mAh
出 力 : 3.7V 600mA

2. 充電器

入 力 : AC100~240V
出 力 : 5.0V 2A

3. モジュール

ライト寿命 : 約 50,000 時間
照射時間 : 約~10 時間
光量 : 約 140.000 lux (光源の直前)

No.	重量(g) (コード無)	色温度 (k)	視野サイズ 40cm (直径 mm)
No.17	17	6,300	95
No.18	17	7,200	95

【使用方法】

(充電方法)

- ① 充電コネクターとバッテリーを接続する
- ② バッテリー残量をインジケータのランプで確認し、ランプが 4 つ点灯するまで充電する。
- ③ 充電完了後、コネクターを取り外す。

インジケータ	バッテリー残量
○○○○	100%
●●●●	76~100%
●●●○	51~75%
●●○○	26~50%
●○○○	0~25%

(使用方法)

- ① モジュールをドクタースコープ又はヘッドバンドに取り付け、バッテリーの出力とモジュールを接続する。ルーペ装着時はバッテリーをポケット又はケースに入れる。
- ② スイッチを入れ、ライトを点灯する。
- ③ スイッチで光量を調節する。
・本品は「販売名：ドクタースコープ(TTL 型)」と併用して使用することができます。

【使用上の注意】

- ・本品が点灯した状態で、LED ライトを直視しないこと。
- ・本品を使用目的に記載された用途以外に使用しないこと。
- ・使用中、移動時、保管時に乱暴に扱わず衝撃を与えない。
- ・分解・改造等はしない。
- ・本品に水をかけない。

【保管上の注意】

- ・箱に入れ、塵芥、振動を避け清潔な場所で保管すること。
- ・湿気、ガス、酸、アルカリ等の汚染物質のそばに置かない。

【包装】

1 箱 1 セット
(モジュール、バッテリー 2 個、チャージャー、
UV カットフィルター、USB コネクター)

【製造販売業者及び製造業者の氏名・名称及び住所】

製造販売業者：株式会社メディカルインクス
福岡県大野城市川久保 1-17-13
TEL:092-513-0050
製造業者：MINAM OPTICS (大韓民国)