

医療用品（6）視力表及び色盲検査表
一般医療機器 視力表（JMDN コード 16800000）

照明式視力検査器 PL-5S（60Hz）

【禁忌・禁止】

移動の際は本体に手をかけず、必ず両手で脚部を持つこと。
転倒する恐れがあります。


ヒューズ、蛍光灯及びグローランプの交換の際は必ず電源
スイッチを切って、電源コードをコンセントから抜いてか
ら行うこと。

感電する恐れがあります。

【形状・構造】

1. 構成

本製品は、本体、脚部から構成され、各部の名称は下図
のとおりです。

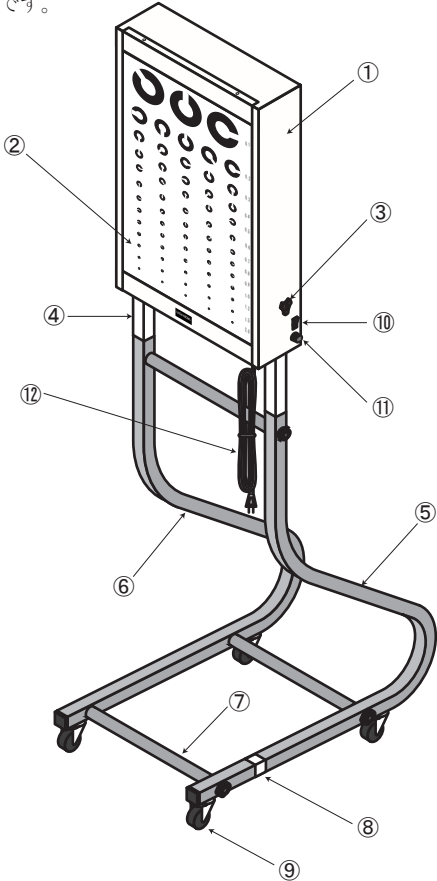

- | | |
|---------------|---------------|
| ① 本体 | ⑨ キャスター |
| ② 視力表 | ⑩ 電源スイッチ |
| ③ 本体高さ調整ノブボルト | ⑪ ヒューズホルダー |
| ④ 支柱 | ⑫ 電源コード |
| ⑤ 脚（右側） | |
| ⑥ 脚（左側） | 付属品 |
| ⑦ 横棒 | 本体防塵カバー |
| ⑧ 視力表位置確認テープ | 六角棒スパナ（脚部組立用） |

2. 電氣的定格
- 電源：AC100V 60Hz 24W
3. 機器の分類
- 電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器
- 電撃に対する保護の程度：B型機器
4. 寸法及び質量
- 本体：335(W)×115(D)×630(H)mm
- 本体脚部取付時：335(W)×551(D)×1500～1950(H)mm
- 質量：11.2kg

- 【性能・使用目的】
1. 性能
- 検査距離：5m
- ランドルト環を用いた視力表
- 視力値：0.1～2.0 13ステップ
2. 使用目的
- 視力検査に用いる視力表

- 【操作方法又は使用方法等】
1. 使用方法
- (1) 検査室は直射日光が入らないようにして視標の背後に窓などが
ない位置で検査します。また、目移りするような掲示物を片付
け、騒音、雑音のない落ち着いた雰囲気で行います。
- (2) 視力表から眼までの距離は5mとします。
(正面右側脚部に貼付した視力表位置確認テープから5m離れた
位置を決めます。)
- (3) 眼の高さと視力表の中心の高さがほぼ等しくなるように本体高さ
調整ノブボルトを緩め本体を上下にスライドして位置合わせした
後、本体高さ調整ノブボルトを締めます。
- (4) 電源コードのプラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入
れ視力表の内部の蛍光灯が点灯したことを確認して検査を行いま
す。
- (5) 検査終了後電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセ
ントから抜きます。
- (6) 本体に防塵カバーをかけて保管します。

- 【使用上の注意】
- 本書に明記した定格で使用してください。
定格と異なった電圧や周波数で使用すると誤作動や火災の原因
となります。
- アースを正しく接続してください。
アース端子は本体底部の電源コード取付け部の横にあります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しやスイッチ操作をしないで
ください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

感電する恐れがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

- 長時間使用しない場合は電源コードのプラグをコンセントからはずしてください。
- 本体、脚部が汚れた場合はシンナーやベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。表面の劣化や溶解の原因となります。汚れたときは中性洗剤を水で薄めて柔らかい布で拭き取ってください。
- 使用後は付属の防塵カバーをかけて保管してください。
- 保管は直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
- 水平な場所で設置や保管をしてください。

【保守・点検に係る事項】

- 一カ月に一度、定期的に電源を入れて照明装置に異常がないことを確認してください。
- 照明装置のちらつき、点滅がないことを確認してください。
- 照明装置にちらつきや点滅がある場合は蛍光灯やグローランプを交換してください。
蛍光灯：20W 1本
グローランプ：FG-1E 1個
- 消耗品を交換しても不具合が解消されない場合は販売店へご連絡の上、修理依頼してください。

【包装】

1 台単位で梱包

【製造業者及び製造販売業者の名称及び住所】

メディカルテック株式会社
〒143-0015 東京都大田区大森西 1-19-16
TEL 03-3762-6204 FAX 03-3762-6214

取扱説明書を必ずご参照ください。