

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 13929001

レネロシリンジ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 造影剤等の高圧注入には使用しないこと。[破損する可能性がある]

【形状・構造及び原理等】

本品は外筒、押し子、ガスケットからなる。筒先にキャップが付くものがある。

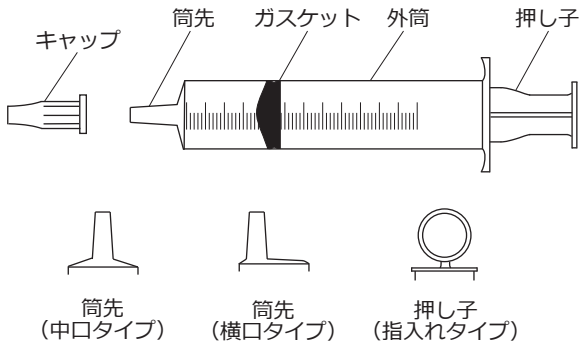

【使用目的又は効果】

液体又はガスを注射・注入するか引き抜くために用いる器具をいう。通常プラスチック製で目盛付の容器及び押し子から成る。注射針を用いて薬剤の投与又は採血に用いることが多い。

【使用方法等】

本品の包装を開け、注射筒の方を持って取り出します。必要な器具と筒先を接続し液体・又はガスを注射・注入又は引き抜くために使用します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 他の医療機器と併用する場合は、確実に接続又は取り付けられていることを確認して使用してください。
- 注射針の装着は無理な力をかけずに行ってください。
- 本品の筒先には直接手を触れないように注意してください。
- 本品に締め付け等、過度な力を加えないように注意してください。破損する可能性があります。
- 接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 接続部に液体又は血液が付着した場合は拭き取ってから使用してください。接続部に緩みが生じる可能性があります。
- 注射針を接続する場合は、キャップをつけたまま接続してください。
- 押し子を引く際は、外筒印刷部の目盛以上に引かないでください。
- 押し子はまっすぐゆっくり引いて下さい。強く引いたり、ねじりながら引くと、外筒との密着性が低下し、液漏れやガスケットの外れが生じる可能性があります。
- 目盛は強くこすらないでください。目盛が消える可能性があります。
- 薬液等が付着した状態で放置しないでください。メモリが剥離する可能性があります。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合や製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 包装を開封したらすぐに使用してください。使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分してください。
- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用してください。
- シリンジポンプを併用する場合は、シリンジポンプのメーカーに適用の可否を確認してください。
- あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用してください。使用中は破損、接続部の緩み及び液体又はガスの漏れ等について、定期的に確認してください。
- 本品に衝撃や、外筒部に過度な圧力を加えないでください。破損する可能性があります。
- 低温下の衝撃で破損する危険があるため、低温時の取り扱いに注意してください。
- 外したキャップは患者等が誤飲しないように注意し、直ちに廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
- 使用期限
製造日より 5 年。（自己認証により設定）

【包装】

1・10・25・50・100 本 / 箱 (50ml・100ml)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売
レネロファーマ株式会社
〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-25-2F
電話番号：03-6277-0897

製造
Evozone GmbH, Germany

