

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000

レネロ輸液セット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 動・静脈輸液への使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ピン針、チューブ、点滴筒、コネクター等からなる。

【構造図】（※代表図：品種により構成部品が異なる場合がある）

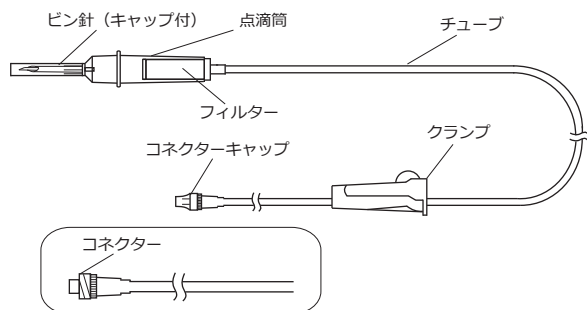

<材質> 本品はポリ塩化ビニルを使用しています。

【使用目的又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤を投与する器具をいう。

【使用方法等】

1. 本品の包装を開け、取り出します。
2. 経腸栄養用容器の所定の位置に、ピン針をしっかりと接続します。この時クランプは完全に閉じた状態にしてください。
3. 接続した経腸栄養用容器をつるし、点滴筒を軽く指で押し離しを繰り返し、点滴筒の半分程度まで栄養剤を満たします。
4. コネクターのキャップを外し、クランプを緩めて栄養剤をコネクター先端まで満たしてチューブ内の空気を抜きます。抜いた後はクランプを再び完全に閉じます。
5. コネクターを経腸栄養用カテーテル等に接続します。
6. クランプを徐々に緩めながら点滴筒内の状態を注視し、輸液速度を調節します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. ピン針の針部及びコネクターの接続部分には直接手を触れないでください。
2. ピン針は栄養剤等の容器のゴム栓に真っ直ぐゆっくり刺通してください。斜めに刺通したり横方向に力を加えると、ピン針等に破損が生じる場合があります。
3. コネクターとの結合部は使用中接続が緩まないように、しっかりと接続し、漏れ等がないように注意してください。
4. 接続部からの液漏れ等、空気混入等の異常が認められた場合は使用しないでください。
5. クランプ使用時は、クランプ内でチューブがずれていないこと、及びクランプの調節が確実にできることを確認してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装が破損、汚損している場合や製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないでください。
2. 包装を開封したらすぐに使用してください。使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分してください。
3. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用してください。
4. 1 回限りで使い捨て、再使用しないでください。
5. あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用してください。使用中は破損、接続部の緩み及び液体の漏れ等について、定期的に確認してください。
6. 本品に衝撃や、特にクランプ部分に過度な圧力を加えないでください。破損する可能性があります。
7. 低温下の衝撃で破損する危険があるため、低温時の取り扱いに注意してください。
8. 外したキャップは患者等が誤飲しないように注意し、直ちに廃棄してください。
9. コネクターを接続する際、過度な締め付けはしないでください。コネクターが外れなくなったり、又はコネクターが破損する可能性があります。

併用に関する注意

1. 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品やアルコール等の有機溶剤を含む消毒液等を使用する場合は、ひび割れについて注意してください。コネクターにひび割れが生じ、液漏れや空気混入等の可能性があります。本品の接続部等にひび割れが確認された場合は使用せず、新しい製品と交換してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
製造日より 5 年。（自己認証により設定）

【包装】

1・10・20・50・100 本 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売
レネロファーマ株式会社
〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-25-2F
電話番号：03-6277-0897

製造
Evozone GmbH, Germany

