

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 輸液用連結管 70399000

レネロ連結チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、コネクター、チューブ等からなる。

【構造図】図：

チューブの長さ 140cm

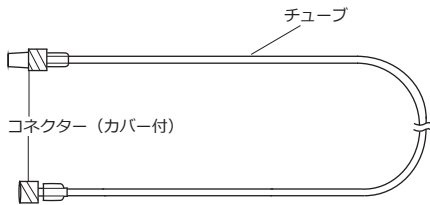

・本品はポリ塩化ビニルを使用しています。

【使用目的又は効果】

本品は、輸液セット等と接続して、薬液等の液を移すために用いる連結チューブである。

【使用方法等】

1. 包装を開封して本品を取り出します。
2. コネクターのカバーを外し、輸液セット等のコネクターと緩みや漏れが生じないようにしっかりと接続します。

使用方法に関連する使用上の注意

1. 接続部の緩みによる漏れや空気の混入には十分注意をして確認をしてください。
2. チューブが折り曲げられていたり、引っ張られた状態で使用しないでください。（チューブ接続部分の破損、外れが生じる可能性があります。）
3. コネクターを接続する際は、過度な締め付けをしないでください。（コネクターが外れない又はコネクターが破損するおそれがあります。）
4. コネクター等のテーパ部に薬液が付着した状態で接続すると接続部に緩みが生じやすくなるので注意してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装が破損、汚損している場合や製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないでください。
2. 包装を開封したらすぐに使用してください。使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分してください。
3. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用してください。
4. 1 回限りで使い捨て、再使用しないでください。

5. 使用中は破損、液体の漏れ等について、定期的に確認してください。
6. 外したキャップは患者等が誤飲しないように注意し、直ちに廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
製造日より 5 年。（自己認証により設定）

【包装】

1・10・20・50・100 本 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売

レネロファーマ株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-25-2F

電話番号：03-6277-0897

製造

Evozone GmbH, Germany