

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 単回使用輸液容器 35127000

レネロ輸液容器


再使用禁止

【禁忌・禁止】

○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

【構造図（代表図）】

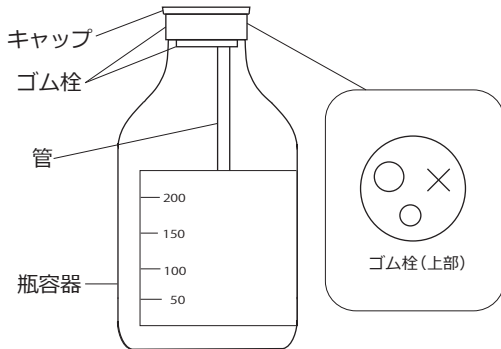

【使用目的又は効果】

脈内輸液セットで投与する輸液混合物を入れるために用いる、ガラス製の容器。本品は単回使用。

【使用方法等】

1. キャップを外します。
2. 容器のゴム栓の○印から輸液混合物を容器に注入します。
3. 輸液容器をハンガーに吊るします。
4. 容器のゴム栓の×印に併用するエア針を真っ直ぐ刺し、瓶内の通気を行います。
5. 併用する輸液セット等と連結して輸液を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 調剤時及び投与時には細菌汚染の危険性があるので、全ての操作は汚染防止に十分な配慮をしたうえで行ってください。
2. 容器のゴム栓にピン針等を刺す場合は、真っ直ぐゆっくり刺通してください。斜めに刺通したり横方向に力を加えると、ピン針やゴム栓、容器に破損が生じる場合があります。
3. 接続部からの液漏れ等、空気混入等の異常が認められた場合は使用しないでください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないでください。
2. 使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分してください。
3. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用してください。
4. 1 回限りで使い捨て、再使用しないでください。

5. 使用中は接続部からの液体の漏れ等について、定期的に確認してください。
6. 本品に衝撃や、過度な圧力を加えないでください。破損する可能性があります。
7. 外したキャップは患者等が誤飲しないように注意し、直ちに廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
製造日より 5 年。（自己認証により設定）

【包装】

1・10・20・50・100 本 / 箱 (250ml・500ml)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売

レネロファーマ株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-25-2F

電話番号：03-6277-0897

製造

Evozone GmbH, Germany