

機械器具 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 通気針 70199000

レネロエアーク

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 注射には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、針管、チューブ、フィルター等からなる。

【構造図】（※代表図：品種により構成部品が異なる場合がある）

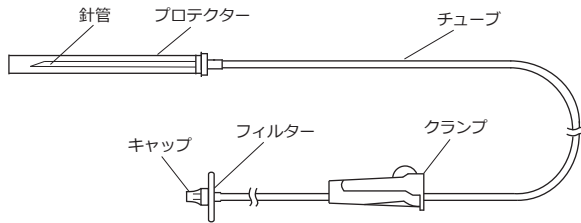

【使用目的又は効果】

本品は、通常、輸液瓶等から輸液する際、瓶内に通気されるために使用する針をいう。チューブ及びフィルタ付もある。

【使用方法等】

1. 包装を開封して本品を取り出します。
2. 本品のプロテクターを真っ直ぐ引いて外します。
3. 輸液容器の排出口を上にして本品の針管を容器のゴム栓の指定された箇所真っ直ぐいっぴいの深さまで突き刺し、容器内を平圧します。
4. クランプで空気の流量を調節できます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 本品の針部には直接手を触れないでください。
2. 針管は容器のゴム栓に真っ直ぐゆっくり刺通してください。斜めに刺通したり横方向に力を加えると、針等に破損が生じる場合があります。
3. クランプ使用時は、クランプ内でチューブがずれていないことを確認してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装が破損、汚損している場合や製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないでください。
2. 包装を開封したらすぐに使用してください。使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分してください。
3. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用してください。
4. 1 回限りで使い捨て、再使用しないでください。
5. 使用中は破損、液体の漏れ等について、定期的に確認してください。

6. 本品に衝撃や、特にクランプ部分に過度な圧力を加えないでください。破損する可能性があります。
7. 低温下の衝撃で破損する危険があるため、低温時の取り扱いに注意してください。
8. 外したキャップは患者等が誤飲しないように注意し、直ちに廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
製造日より 5 年。（自己認証により設定）

【包装】

1・100 本 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造・製造販売
レネロファーマ株式会社
〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-25-2F
電話番号：03-6277-0897