

機械器具（48）注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 13929001

メリット バックロック AT

再使用禁止


【禁忌・禁止】

使用方法

- ・バルーンカテーテルの最大拡張圧を超える加圧は絶対行わないこと。[破損の可能性がある]

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

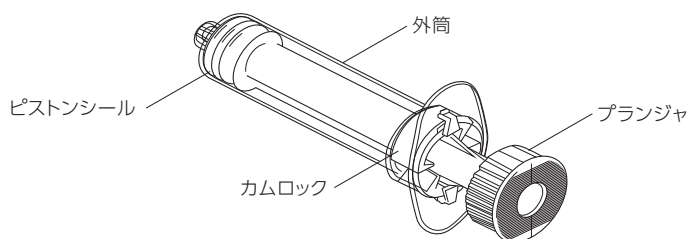

<シリンジの容量>

製品番号	容量
VAC220	20mL
VAC230	30mL

【使用目的又は効果】

本品は、主として薬液投与、又は採血等に使用するための器具である。プラスチック製で目盛付の外筒及びプランジャから成る。

【使用方法等】

1. 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認し、無菌的に本品を取り出す。
2. 製品に破損や不具合がないかを確認する。
3. 吸引する場合は、必要な位置までプランジャを引く。プランジャがカムロックとかみ合って止まるまで時計回りに回し、ロックする。
4. ロックを解除する場合は、プランジャが止まるまで反時計回りに回す。
5. シリンジをロックすることなく液体等を吸引する場合は、必要な位置までプランジャを引き、その位置で保持する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 予め他の医療機器等との接合部に緩みが無いことを確認し、使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れが無いことを確認すること。[本品の破損等により、破損部から液漏れや空気混入の可能性がある。]
2. 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]
3. 外筒の目盛を超えてプランジャを引くと、プランジャが外筒から外れる可能性があるので、注意すること。
4. プランジャはまっすぐに引くこと。[斜めに引くとピストンシールと外筒の密着性が悪くなり、液漏れ、空気混入又はピストンシールの外れが生じる可能性がある。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 使用前に包装に破損等がないこと、及び製品に不具合がないことを確認すること。
2. 使用前に接続部に緩みのないことを確認すること。また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れについて定期的に確認すること。
3. 本品を接続する際、過度の締め付けには十分に注意すること。[接続部が外れなくなる、又は破損する可能性がある。]
4. 接続部に薬液や血液等が付着すると、接続部に緩み等が生じる可能性があるので注意すること。
5. 有効期限内に使用すること。

<不具合・有害事象>

本品の不適切な使用により、以下のような有害事象の可能性がある。

- ・組織の損傷、院内感染

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

直射日光、水ぬれ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。

<有効期間>

製品包装に表示[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メリットメディカル・ジャパン株式会社

製造業者：Merit Medical Systems, Inc.

国名：米国

