

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 内視鏡用マウスピース 70951000

メリット バイトブロック

再使用禁止

【警告】

使用方法

- ・本品を使用中は患者の安全に配慮し、常に酸素レベルをモニターすること。[内視鏡の位置、又は本品の不正確なサイズ選択による口腔内気道の部分的な閉塞により嘔気が誘発され、低酸素の要因となる可能性がある。]

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光、水ぬれ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。

〈有効期間〉

製品包装に表示。[自己認証（自社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売業者：メリットメディカル・ジャパン株式会社

外国製造業者：Merit Medical Systems, Inc.

国名：米国

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

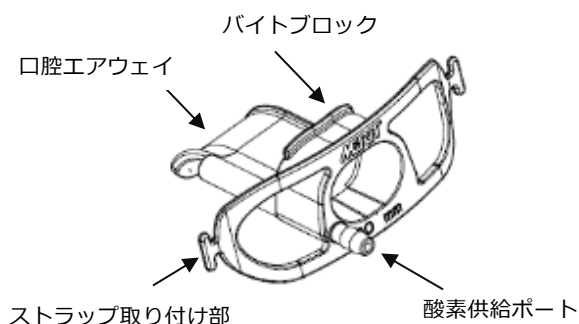

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡使用時に患者の開口状態を保持する器具である。

【使用方法等】

1. 患者に合わせて、本品のサイズを選択する。
2. 患者の口腔内に本品を挿入し、ストラップを使用して患者の頭部に本品を固定する。
3. 本品の酸素供給ポートに酸素チューブを接続し、酸素供給ラインに確実に接続されていることを確認する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 酸素供給ポートから吸引及び注入しないこと。[酸素供給以外の使用を想定していない。]
2. 使用前に本品の破損の有無を検査すること。
3. 患者の歯の付近に指を近づけないこと。[患者の歯と本品の間に指が挟まれ指が損傷する可能性がある。]
4. 接続部は緩みや外れが生じないよう確実にしっかりと接続すること。[接続部の緩み、又は接続不良は、本品の位置ずれや酸素供給不足の要因となる。]

