

機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 注射筒用フィルタ 15283000

ベンテッドマイレクス

再使用禁止

【警告】

1. 包装に破損や異常があるときは使用しないこと。
2. 本品を注射筒の連結部に取り付ける際には無菌的に行なうこと。
3. 使用後の本品は医療廃棄物として処理すること。

*【禁忌・禁止】

1. 本品は滅菌済み製品であり、1 回限りの使用で再滅菌・再使用しないこと。
2. 製造工程では使用しないこと。
3. 注射筒以外には接続しないこと。

本製品には、メンブランフィルターの孔径の違いにより、ベンテッドマイレクス PF ならびに GS の 2 種類がある。

【形状、構造及び原理等】

<組成>

メンブランフィルター セルロース混合エステル
本体及びサポートスクリーン ポリビニルクロライド (PVC)
空気抜用フィルター ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)


<寸法>

長さ 27mm 直径 29mm

<製品図>

接続部：入口側・・・メス型ルアーロック
出口側・・・オス型ルアースリップ

構造図

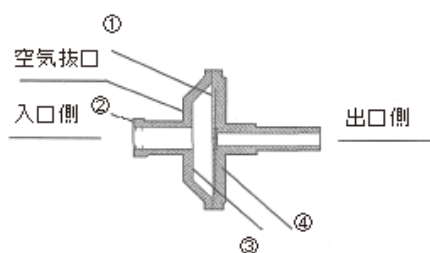

断面図

- ① メンブランフィルター
- ② 本体
- ③ 空気抜用フィルター
- ④ サポートスクリーン

<原理>

ハウジングの入口、出口側にルアー継手を用い、ハウジングに内蔵されているメンブランフィルターを使用してろ過をする。

<滅菌方法>

エチレンオキシドガスによる。

【使用目的又は効果】


<使用目的>

附属異物ろ過フィルターとして使用する。


【使用方法等】

<使用方法>

- (1) 本品は滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。
- (2) ろ過する溶液を注射筒に入れる。

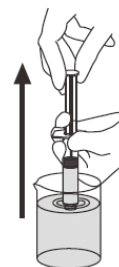


- (3) 本品が入っているプラスチック製のパッケージを持ちカバーシートを無菌的にはがす。

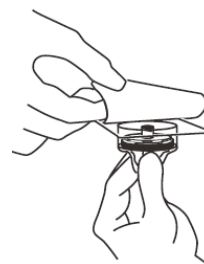

- (4) 注射筒を本品ユニットに接続し、包装から取り出す。



- (5) 注射針を無菌的に接続する。
 (6) 注射筒を垂直に持ち（針が上に向くように）2～3 滴、液が出るまで操作する。この際、指等により出口側を汚染しないように注意する。

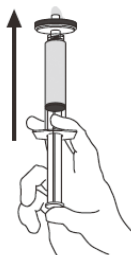

- (7) ろ過する。



<使用方法に関連する使用上の注意>

- (1) 医薬品あるいは関連機器の使用については、その医薬品あるいは機器の添付文書に従うこと。
- (2) 注射針を接続してろ過をする際は、注射針がはずれる可能性があるため、充分注意して取り扱うこと。
- (3) 本品は無菌的に取り出し、開封後は直ちに使用すること。
- (4) メンブランフィルターを損傷し、正常にろ過できないおそれがあるため、50%以上の濃度のアルコール（メタノール又はエタノール）やその他の化学薬品などは使用しないこと。

【使用上の注意】

<使用注意>

- (1) 10mL 未満の注射筒で使用すると、耐圧限度の 517kPa を超え、本品の破損や使用者の負傷を招く恐れがあるため、使用しないこと。
- (2) 本品は 45℃以上の温度では使用しないこと。
- (3) 本品は 2 ウエイ用フィルターとして使用しないこと。
- (4) 本品は乳剤や懸濁液で使用しないこと。

- (5) ろ過容量は 100mL 以上で使用しないこと。

<重要な基本的注意>

- (1) 本品の使用に際しては、医師の指示に従って使用すること。
- (2) 水漏れに注意すること。
- (3) 本品を使用中、異常が無いことを常時監視すること。
- (4) 本品を使用中、液漏れなどが生じた場合、直ちに医師の指示に従って処置すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保存すること。

<有効期間>

滅菌年月より 3 年〔自己認証（当社データ）による〕
 包装の使用期限欄を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

メルク株式会社
 〒153-8927 東京都目黒区下目黒一丁目 8 番 1 号
 TEL : 03-4531-1140

<製造業者>

Merck Millipore Ltd.
 国名：アイルランド

【製品仕様】

項目 \ タイプ	GS	PF
メンブランフィルターの孔径	0.22 μm	0.8 μm
空気抜用フィルター	0.03 μm	0.2 μm
接続	入口側：メス型ルアーロック 出口側：オス型ルアースリップ	
ろ過面積	3.9cm ²	
耐圧（25℃）	517kPa	
温度条件	最高 45℃ まで	

【入数】

1 箱に 50 個入り