

機械器具 74 医薬品注入器

管理医療機器、静脈ライン用フィルタ 35072000

カシベクス GV

再使用禁止

[禁忌・禁止]

＜使用方法＞

再使用禁止、再滅菌禁止


[使用目的又は効果]

輸液セットに接続して、医薬品中の微小異物、細菌又は真菌の除去に用いる。

[形状・構造及び原理等]

構造図

カタログ番号 SLGV0250S

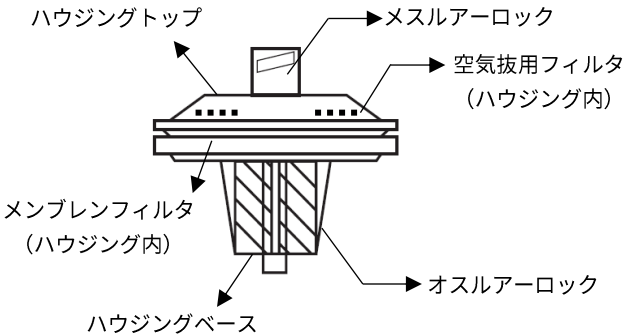

寸法

長さ：	25 mm
直径：	29 mm
ろ過面積：	4 cm ²

本製品は、ハウジングに内蔵された孔径 0.22 μm のメンブレンフィルタを使用して、ろ過により輸液中の微細な異物、細菌、真菌を除去します。本製品は、メンブレンフィルタ、ハウジングトップ、ハウジングベースで構成されています。入口側の形状はメスルアーロック、出口側の形状はオスルアーロックです。本製品には、孔径 0.03 μm の空気抜用フィルタも装備されています。

構成要素	原材料
ハウジングトップ	ポリ塩化ビニル
ハウジングベース	
メンブレンフィルタ	ポリビニリデンフロライド
空気抜用フィルタ	ポリテトラフルオロエチレン
残液量：	0.1 mL 以下 (空気による排気後)
ろ過体積：	1～100 mL
流量：	4 mL/min 超

[使用方法等]

本製品はエチレンオキシドで滅菌された単回使用製品です。

手袋を着用し、無菌状態で操作してください。アセンブリをパッケージから取り出してください。

使用方法

- (1) 無菌操作を用います。保護材は組み立て作業の途中で除去します。
- (2) プライミングした投与セットのオスアダプタをフィルタのメスルアーロックコネクタ（インレット）に接続し、これを包装から取り出します。
- (3) 投与セットの流量制御クランプを開きます。軽く叩いて気泡を除去しながら、フィルタを溶液でプライミングします。流量制御クランプを閉じます。
- (4) 針を使用する場合：オスルアーロックコネクタ（アウトレット）に針を取り付け、濡れたフィルタに数滴押しこんで空気を除去し、静脈穿刺を行います。
- (5) 投与セットの流量制御クランプを使用して流量を調節します。

[使用上の注意]

重要な基本的注意

- (1) 髄腔内投与には使用しないこと。
- (2) 本製品は 45 °C を超える温度で使用しないでください。
- (3) 乳剤、懸濁液、粘度の高い溶液や血液には使用しないでください。
- (4) 最大使用圧力 310 kPa を超える圧力で使用しないでください。
- (5) 充填された溶液が排出される（加圧）方向にのみ使用してください。
- (6) 24 時間以内に交換する必要があります。
- (7) 末梢投与の場合は、フィルタを静脈穿刺部位に固定します。他の静脈内投与で穿刺部位を固定できない場合は、ハウジング内に溶液が満たされた状態を保つために、フィルタを患者の中腋窩線より下に配置します。

- (8) 溶液をろ過する前に、フィルタを十分に湿らせてください。(フィルタが適切に湿っていないと、空気が詰まる可能性があります。)

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用）

<併用注意>

- (1) 自然落下式輸液セットと一緒に使用します。
自動システムでは使用しないでください。

[保管方法及び有効期間等]

保管方法

直射日光、紫外線、高温多湿を避けて常温で保管してください。

有効期間

滅菌月から3年間[自己認証（会社データ）に基づく]
個包装または外箱に記載の有効期限欄を確認してください。

*** [製造販売業者及び製造業者の名称等]**

製造販売業者：メルク株式会社

電話：03-4531-1140

外国製造業者：Merck Millipore Ltd.（アイルランド）

Merck KGaA（ドイツ、ダルムシュタット）の関連会社