


器具器械 49 歯科用穿刺器、穿削器及び穿孔器
* 管理医療機器 歯科用電動式ドリル 「JMDN」 43311000

ジッペラー ゲーツ ドリル

【形状・構造及び原理等】

[形 状]

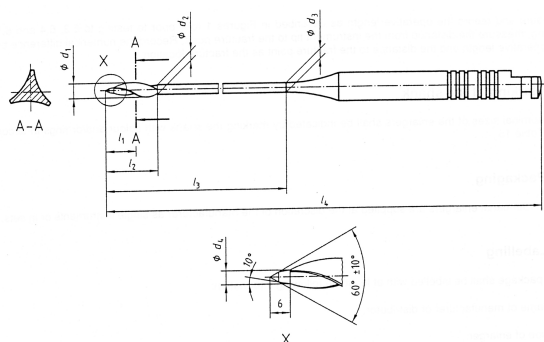

- d_1 : 作業部最大直径
 d_2 : 作業部末端における頸部直径
 d_3 : 操作部端における頸部直径
 d_4 : 先端部直径
 l_1 : 先端部から最大直径 d_1 部の A-A 面までの長さ
 l_2 : 作業部長さ
 l_3 : 操作部長さ
 l_4 : 全長

(単位 mm)

サイ ズ別 種類	d_1 ±0.05	d_2 +0.05 -0	d_3 +0 -0.07	* d_4 ±0.05	l_1 (約)	l_2 最小	シャンクの リング数
001	0.50	0.38	0.38	0.25	1.50	2.30	1
002	0.70	0.48	0.48	0.30	1.70	2.70	2
003	0.90	0.58	0.58	0.35	1.90	3.10	3
004	1.10	0.68	0.68	0.40	2.10	3.50	4
005	1.30	0.78	0.78	0.45	2.30	3.90	5
006	1.50	0.87	0.87	0.50	2.50	4.30	6

$l_3 = 15.2 \pm 0.5 \text{ mm}$

$l_4 = 32 \pm 0.5 \text{ mm}$

シャンク部は JIS T 5215 (歯科用根管口拡大 G 形ドリル) の軸部形式 1 (CA 用) の形状・寸法と同じです。

[原材料] ステンレス鋼

[原 理] 歯科用コントラングルハンドピースに接続し、回転を与えることにより刃部も回転し、この回転により歯に穿孔します。

【使用目的又は効果】

回転運動による根管拡大形成用器具。

【使用方法等】

歯科用コントラングルハンドピースに装着し、800～1,200rpm の回転を与えて使用します。

【使用上の注意】

- ①患者毎に必ず滅菌を施すこと。
- ②ハンドピースへの装着は、シャンクを確実に奥まで挿入すること。
- ③ドリルは減速コントラングル、回転数 800～1,200rpm で使用すること。
- ④予め口腔外で回転させ、振れがないことを確認すること。
- ⑤無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ⑥本品は未滅菌品であるため、使用に際しては必ず洗浄し、

【保守・点検に係る事項】に記載する滅菌条件又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件において滅菌を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に関する事項】

[滅菌条件]

本品使用後は、水洗の後、超音波洗浄器、清掃液、消毒剤などにより付着物を完全に除去した後、十分に乾燥させ、下記に記載する条件又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件において滅菌を行うこと。

滅菌方法：高圧蒸気滅菌

滅菌条件：温度 132℃、時間 10 分以上

[使用者による保守点検事項]

使用前・使用後は破損、ひび、傷、腐食等がないか確認すること。異常が認められた場合は使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連 絡 先：<https://www.mokuda.co.jp>

製 造 業 者：ブィディダブリュ社/ドイツ

VDW GmbH/Germany