

機械器具 65 齒科用充填器

*一般医療機器

歯科用注入器具


「JMDN」 70718000

ヘンケプレス 印象材注出器

【形状・構造及び原理等】

〔形状及び寸法〕

(単位 mm)

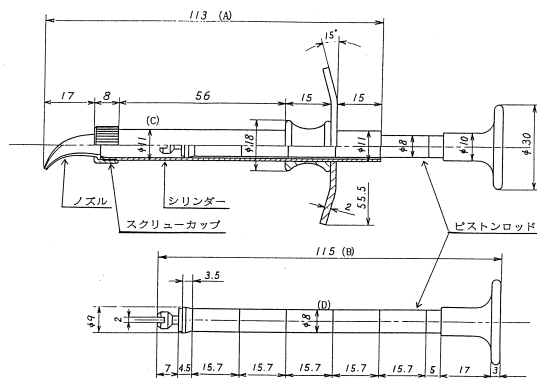

[原材料]

本 体：ステンレス・スチール製

ノズル：硬質プラスチック製

[構造]

- ①ノズルはスクリーカップのねじ止めにより着脱が可能で、互換性を有します。
- ②ピストンロッドは、シリンダーから容易に引き抜けます。

〔原 理〕 シリンダー内に練和した二次印象材を充填した後、ピストンロッドをシリンダーに挿入します。シリンダー先端にノズルを取付、ピストンロッドを押すことによりシリンダー内の二次印象材がノズル先から排出されます。

*【使用目的又は効果】

歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる器具をいう。

* 【使用方法等】

- ① シリンダーからピストンロッドを引き抜きます。
- ② 先端部のスクリューカップを反時計回りに回転して取り外し、ノズルをシリンダー先端部に接続させた後、スクリューカップをはめ込み時計方向にねじ込み、ノズルを固定します。
- ③ 練和した二次印象材をシリンダー内にスパチュラ等を用いて充填します。
- ④ ピストンロッドをシリンダー内にはめ込みます。
- ⑤ 所定の箇所にノズルを向け、ピストンロッドを押すことにより、必要量の二次印象材を排出します。

【使用上の注意】

- ①使用前、使用後はひび、割れ、凹凸、錆、変形等を確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。
- ②本品は未滅菌品であるため、使用に際しては必ず洗浄し、【保守・点検に係る事項】に記載する滅菌条件又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件において滅菌を行うこと。

* 【保管方法】

歯科の従事者以外が触れないように室温で適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

〔滅菌条件〕

本品使用後は、水洗の後、超音波洗浄器、清掃液、消毒剤などにより付着物を完全に除去した後、充分に乾燥させ、下記に記載する条件又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件において滅菌を行うこと。なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、製品の劣化を防ぐため、パーレルと本体を取り外すこと。

滅菌方法：高压蒸汽滅菌

滅菌条件：温度 132℃、時間 10 分以上

(過度の温度上昇を避けるため乾燥工程は省くこと)

[使用者による保守・点検事項]

使用後は必ず、ピストンロッド及びシリンダー内の印象材を除去し、次の使用に備えて添付の清掃用ブラシで清掃しておくこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連 絡 先：<https://www.mokuda.co.jp>

製造業者：ヘンケ社／ドイツ

Henke-Sass, Wolf GmbH/Germany