


再使用禁止 エアー・ソニック 根管洗浄チップ 滅菌済

【形状・構造及び原理等】

〔構造〕

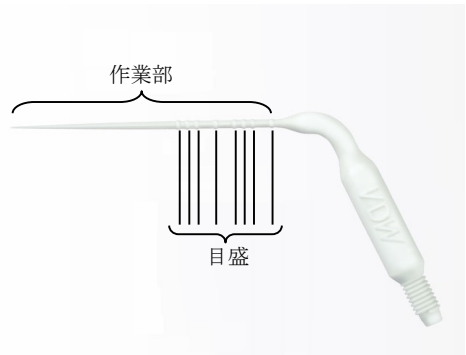

〔原材料〕 ポリアミド

〔原 理〕 歯科用エアスケーラの駆動により発生した高周波振動が、ポリアミド製の本品に伝達される事で高速振幅振動を行い、根管内で微細な気泡が生成され破裂し、かつ旋回渦を生成する作用により洗浄する。

【使用目的又は効果】

創面清掃の目的で処置する部位（窩洞やう窩）を洗浄し、歯及び残留充填材等の破片又は壊死性物質及び感染性物質を除去するために歯科治療で使用するよう特別に設計された器具で、能動型医療機器に接続する。

【使用方法等】

- ① 歯科用エアスケーラの差込口に挿入し、時計回りに回して接続固定する。
- ② 本品を形成後の根管に挿入する。
- ③ 次亜塩素酸ナトリウム、もしくは EDTA で根管内を満たし、エアスケーラを作動させてから本品を上下方向に動かす。
- ④ 洗浄終了後、エアスケーラの差込口から反時計回りに回して本品を取り外し、廃棄する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ エアスケーラメーカーの指示に従って、脱落しないように固定すること。
- ・ 接続時に本品の作業部を曲げず、また捻じらないこと。曲がり、捻りができた場合には使用せずに、新品と交換すること。
- ・ 1 回の作動時間が最長 30 秒間を超えないこと。

【使用上の注意】

- ① 本品は以下の適合する歯科用エアスケーラと組み合わせて使用すること。適合しない歯科用エアスケーラを使用した

場合には、破損により人体を傷つける恐れがある。

株式会社ナカニシ	ティーマックス S 9 7 0 (L, KL, SL)
カボデンタルシステム ズジャパン株式会社	ソニックフレックス エア ースケーラー 2 0 0 3

- ② 本品は必ず上限周波数の 6000Hz 以下で使用する。上限周波数を超えた場合には、破損により人体を傷つける恐れがある。
- ③ 本品は形成後の根管内でのみ使用すること。
- ④ 本品による根管洗浄中は加圧をしないこと。抵抗を感じる場合は使用を中止すること。
- ⑤ 根尖部が開拡している状態では、本品の目盛を確認し根尖部の 1mm 手前を限度として挿入すること。
- ⑥ 本品を使用する場合は、感染防止のために必ずラバーダムを使用すること。
- ⑦ 本品を使用する場合は、目の損傷を防ぐために、保護めがねを着用すること。
- ⑧ 本品は単回使用医療機器のため治療後に必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 直射日光を避けて保存すること。
- ② 本品は滅菌品であり単回使用医療機器のため、未開封で包装状態のまま保管すること。

〔使用期限〕

- ・ 包装に記載の有効期限までに使用すること。

〔使用期間〕

- ・ 使用中に、曲がり、変形または磨耗を確認した場合は、使用を中止し廃棄して、新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

〔保守・点検に関する注意事項〕

- ・ 本品は、高圧蒸気滅菌器による滅菌ならびに消毒剤による消毒はできない。滅菌ならびに消毒は本品の変形・破損等を起こすため避けること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会
連 絡 先： <https://www.mokuda.co.jp>
製 造 業 者：グィディダブリュ社／ドイツ
VDW GmbH／Germany