

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 「JMDN」 70459000

再使用禁止


根尖吸引 根管・ポケット洗浄ニードル

【禁忌・禁止】

- ・ ニッケルに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

[形状]

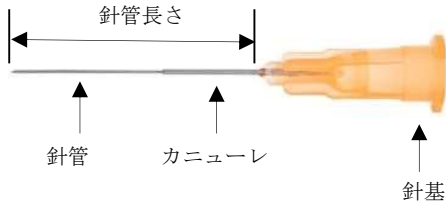

規格	サイズ	針管外径 (mm)	針管長さ (mm)
根管上部・ポケット NiTi 22mm 25G ブラック	25G	0.5	22
根管上部・ポケット NiTi 22mm 27G ブルー	27G	0.4	22
根尖側 NiTi 22mm 30G オレンジ	30G	0.3	22
根尖側極細 NiTi 22mm 31G ブラウン	31G	0.25	22
根管上部・ポケット NiTi 26mm 25G ブラック	25G	0.5	26
根管上部・ポケット NiTi 26mm 27G ブルー	27G	0.4	26
根尖側 NiTi 26mm 30G オレンジ	30G	0.3	26
根尖側極細 NiTi 26mm 31G ブラウン	31G	0.25	26

[材質]

針 管：ニッケルチタン合金
針 基：ポリプロピレン
カニューレ：ステンレス鋼

[原理]

針基をシリンジと接続し、針管を根管等に挿入し、液の注入、吸引を行う。

【使用目的又は効果】

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる。

【使用方法等】

- ①使用前に洗浄、滅菌を行う。
- ②洗浄、滅菌方法は 75%の医療用アルコールに 5 分間浸漬した後、70～75℃で乾燥させ、滅菌バッグに入れ 121℃で 15 分、高圧蒸気滅菌する。
- ③ルアーロックタイプのシリンジ等に緩みや外れがないようにしっかり取り付ける。
- ④針管先端を洗浄部位に挿入し使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 洗浄液等を注入する際、針先端、洗浄液等が根尖を突き抜けないように、根尖から2mm以上アンダーの位置より注入し、針管が根管壁に接触しないようにすること。
2. 使用前の洗浄・滅菌は使用分のみ行うこと。滅菌を複数回行うとカニューレが針基から抜ける可能性がある。
3. 針管には直接手を触れないこと。
4. ロック部分が適合しないシリンジは使用しないこと。
5. 針基とシリンジを過度に締め付けないこと。
6. 洗浄液が針管から注出することを確認後使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について十分注意すること。
2. 針管を繰り返しの折り曲げはしないこと。
3. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 水濡れに注意し、直射日光及び高温高湿を避けて、清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

推奨される滅菌方法に従って滅菌処理を行うこと。
種類：高圧蒸気滅菌
条件：121℃ 15 分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会
連絡先：https://www.mokuda.co.jp
製造業者：シンガポールスマートテック／シンガポール
SINGAPORE SMART TECH PTE. LTD.