


機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 手術用ドリルビット 32390000

ベクト セラミックパイロットドリルエキストラショート

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

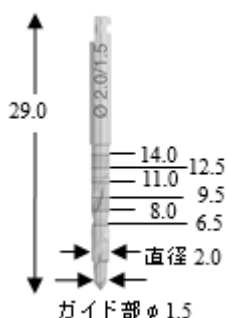

(単位: mm)

【体に接触する部分の主な組成】

セラミック

【原理】

歯科用ハンドピースに装着して使用する。

【使用目的又は効果】*

SPI システムインプラント又はインセルインプラントを埋入する際、骨を穿孔するのに使用する。

【使用方法等】**

【使用方法】

- (1) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
- (2) 軽く圧力をかけながら、埋入するインプラント体の深さまで埋入窩を形成する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
- (3) 本品は、回転させた状態で穿孔を始めること。
- (4) 使用回転数は、800 rpm を目安とすること。
- (5) 本品は、骨内で回転を止めないように使用すること。
- (6) 本品は、逆回転では使用しないこと。
- (7) 破損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- (8) 術中は外部注水により冷却効果を確保し、常に断続的なポンピングで行うこと。
- (9) 必ずベクト パイロットドリル用ガイドスリーブ (別売品) を使用すること。[専用品以外を使用した場合、ドリリングでガイドスリーブが損傷した際、本品とガイドスリーブの間に挟まった材料が損傷の原因になる恐れがある。]
- (10) 本品の使用回数は、20 症例が目安である。(20 回まで使用可能ということではない。)
- (11) 本品は、長さ 14 mm までのインプラント体に使用すること。

【保守・点検に係る事項】

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件 (日本薬局方による): 115~118℃ 30 分間
121~124℃ 15 分間
126~129℃ 10 分間
- (2) 135℃以上に加熱しないこと。
- (3) プラスチックケースは耐熱性がないため、滅菌の際は使用しないこと。

【殺菌・消毒】

- (1) 熱湯と洗浄剤の相互作用により、本品に損傷を与えるため、器具除染用洗浄器で洗浄しないこと。
- (2) 変色の恐れがあるため、紫外線による殺菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: 株式会社モリタ

電話番号: 06-6380-2525

外国製造業者: トーメン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名: スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口: 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号: 0800-222-8020 (無料)

Fax 番号: 0800-222-6480 (無料)

E-mail: e-customer@morita.com