

印象コーピング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 印象コーピングは、再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】*

【形状・構造】


本品には、形状及びサイズの違いにより以下の種類があり、S P I システムインプラント又はイニセルインプラントの直径にそれぞれ対応している。また、①～④に対応する 3 種類のスクリューがある。

印象コーピング（再使用禁止）

- ① クローズドトレイ用ショート
- ② クローズドトレイ用ロング
- ③ オープントレイ用シリンダー型
- ④ オープントレイ用

スクリュー

- ⑤ スクリューショート（クローズドトレイ用）
- ⑥ スクリューロング（クローズドトレイ用）
- ⑦ スクリュー（オープントレイ用）

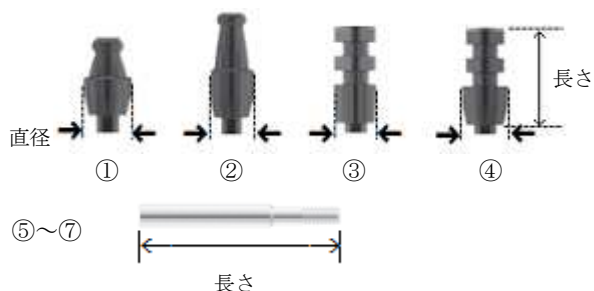

【サイズ】

（単位：mm）

	規格	直径	長さ
①	3.5	3.9	8.0
	4.0	5.0	
	4.5	5.5	
	5.0	6.5	
	6.0	7.0	
②	3.5	3.9	12.0
	4.0	5.0	
	4.5	5.5	
	5.0	6.5	
	6.0	7.0	
③	3.5	3.8	10.0
	4.0	4.3	
	4.5	4.8	
	5.0	5.3	
	6.0	6.3	
④	4.0	5.0	10.0
	4.5	5.5	
	5.0	6.0	
	6.0	7.0	
⑤	3.5	—	12.5
	4.0 - 6.0	—	13.2
⑥	3.5	—	16.5
	4.0 - 6.0	—	17.2
⑦	3.5	—	21.5
	4.0 - 6.0	—	22.2

【体に接触する部分の主な組成】

印象コーピング : アルミニウム

スクリュー : ステンレス鋼

【原理】

S P I システムインプラント又はイニセルインプラント埋入後に、装着したジンジバルフォーマーを外し、本品を装着して、印象コーピングスクリューを用いて固定する。その後、精密印象材料を用いて通法どおり印象採得を行う。

【使用目的又は効果】*

S P I システムインプラント又はイニセルインプラントの印象採得時に用いる。

【使用方法等】*

【使用方法】

- (1) S P I システムインプラント又はイニセルインプラント埋入後に装着したジンジバルフォーマーを外し、印象コーピングを装着して、対応するスクリューを用いて固定する。
- (2) 精密印象材を用いて通法どおり印象採得を行う。

【保守・点検に係る事項】

【滅菌】

- (1) 使用前に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名：スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com