

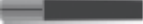
歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

アナログ

【形状・構造及び原理等】*/**

【形状・構造】

本品には、形状の違いにより以下の種類がある。

種類	形状	全長	規格
アナログ		14.0 mm	※
アナログ ロング		22.0 mm	※
ボール アタッチメント用		13.0 mm	直径 2.25 mm
ヴァリオマルチ用		21.2 mm	直径 4.8 mm
アナログ CAD/CAM 用		11.4 mm	※

※ S P I システムインプラント又はイニセルインプラントの直径に対応して、規格 3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 がある。

【原理】

- ・アナログ、アナログ ロング：S P I システムインプラント又はイニセルインプラント埋入後、印象材を用いて採得した印象に本品をセットして、石膏等を用いた作業模型上にインプラント等の位置を正確に再現する。
- ・ボールアタッチメント用：S P I システムインプラント又はイニセルインプラントにボールアタッチメントを装着して採得した印象に本品をセットして石膏作業模型を作製する。
- ・ヴァリオマルチ用：口腔内にヴァリオマルチアバットメント装着後、印象材を用いて採得した印象に本品をセットして、石膏等を用いた作業模型上にアバットメントの位置を正確に再現する。
- ・アナログ CAD/CAM 用：口腔内若しくは模型上にトーメン スキャンアバットメント装着後、デジタル印象採得によって作製された作業用模型のアナログ窩に本品をセットして、トーメン スキャンアバットメントの位置を正確に再現する。

【使用目的又は効果】**

S P I システムインプラント又はイニセルインプラントの印象採得時に用いる。

【使用方法等】*/**

【使用方法】

アナログ、アナログ ロング

- (1) S P I システムインプラント又はイニセルインプラント埋入後、印象を採得する。
- (2) 採得した印象に本品をセットして、石膏作業模型上にインプラント等の位置を正確に再現する。

ボールアタッチメント用アナログ

本品は、ボールアタッチメントを使用したデンチャー修復の場合で模型上でマトリックスとデンチャーを重ねる間接法の場合に使用する。

- (1) S P I システムインプラント又はイニセルインプラントにボールアタッチメントを装着して印象を採得する。
- (2) 採得した印象に本品をセットして、石膏作業模型を作製する。

ヴァリオマルチ用アナログ

- (1) 口腔内にヴァリオマルチアバットメント又はアバットメント 17° (アングル) を装着する。
- (2) 印象を採得する。
- (3) 採得した印象に、印象コーピングスクリュー (直径 3.5mm 用) で本品を固定し、石膏作業模型上にアバットメントの位置を正確に再現する。

アナログ CAD/CAM 用

本品は、トーメン スキャンアバットメントを使用したデジタル印象採得によって、3D プリンターで作製された作業用模型に使用する。

- (1) 口腔内若しくは模型上にトーメン スキャンアバットメントを装着し、スキャナーを用いて、デジタル印象採得を行う。
- (2) 3D プリンターで作製された作業用模型のアナログ窩にアナログ CAD/CAM 用 挿入ツールを用いて本品をセットして、アバットメントの位置を正確に再現する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) アナログ CAD/CAM 用に摩耗や損傷等が無いことを確認すること。
- (2) アナログ CAD/CAM 用を頻回に着脱しないこと。[頻回に着脱することで配置が安定しない可能性がある]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーメン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名：スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020 (無料)

Fax 番号：0800-222-6480 (無料)

E-mail：e-customer@morita.com