

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000

技工用スクリュー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 技工用シリンダーピンは、再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】


〔形状・構造〕

SPI チタンベースアバットメント等使用する①「技工用スクリュー」と②「技工用シリンダーピン」の 2 種類がある。
それぞれに直径 3.5mm 用と直径 4.0-6.0mm 用がある。

①技工用スクリュー

②技工用シリンダーピン

(再使用禁止)

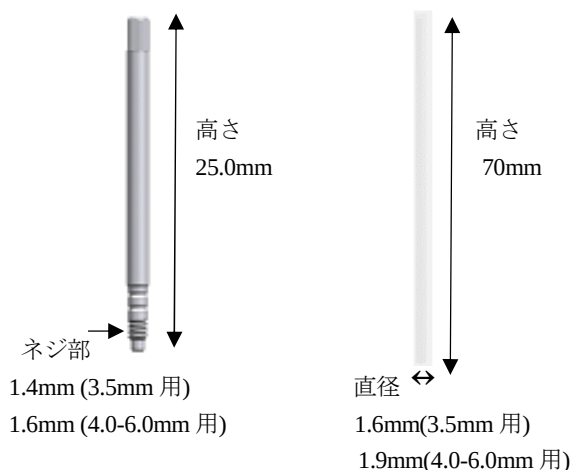

〔原理〕

模型上のアナログにアバットメント等を本品で固定し、上部構造物を重合化させる。又はアバットメントに本品を差込み、余剰セメントがスクリューホール内に入り込むのを防ぐ。

【使用目的又は効果】

本品は歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着、固定などに用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

①技工用スクリュー

- (1) 本品に薄くワセリンを塗布する。
- (2) 模型上のアナログに SPI チタンベースアバットメント等を本品で固定し、クラウンを作製する。

②技工用シリンダーピン

- (1) 本品を適切な長さに切断する。
- (2) SPI チタンベースアバットメントに本品を差込み、余剰セメントがスクリューホール内に入り込むのを防ぐ。
- (3) 作製した上部構造物を SPI チタンベースアバットメントに確実にはめ込む。
- (4) ボンディング材重合後、本品を取り出す。

〔組み合わせて使用する医療機器〕

- (1) 本品は、「販売名：SPI チタンベースアバットメント(承認番号：22800BZX00097000)」と併用して使用する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- (1) 口腔内への暫間補綴物の最終装着には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名：スイス

〔お問い合わせ先〕

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com