


機械器具 61 歯科用ハンドピース
一般医療機器 歯科技工用電動式ハンドピース 70746000

オズ ブラック - P

【形状・構造及び原理等】*

【形状・構造】

(正面拡大図)

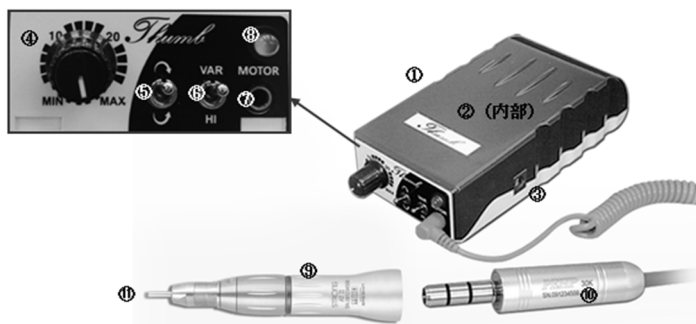

①	コントローラー	⑦	ハンドピースコネクター
②	ニッケル水素電池	⑧	動作ランプ
③	充電コードコネクター	⑨	ストレートハンドピース
④	電源&ボリュームダイヤル	⑩	モーターカールコード
⑤	正逆回転切換スイッチ	⑪	テストバー
⑥	VAR/HI モード切換スイッチ		

【電気的定格】

- ・定格電源電圧：AC 100 V
- ・電源周波数：50/60 Hz
- ・消費電力：24 VA

【原理】

歯科用バー等をハンドピースに固定し、電気駆動により回転、振動などの動作を伝達することにより、石膏、金属歯冠、義歯、人工歯冠などを切削または研磨する。

【付属品】

- ・パワーアダプター及び充電コード
- ・レンチ

【使用目的又は効果】

歯科用バー等をハンドピースに接続し、石膏、金属歯冠、義歯、人工歯冠等の歯科技工作業における切削・研磨に用いる。

【使用方法等】*

詳細については、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用方法】

- (1) 電源&ボリュームダイヤルが MIN よりも右の位置になっていること (電源 OFF) を確認する。
- (2) コントローラーのハンドピースコネクターにモーターカールコードを接続する。
- (3) コントローラーに接続したモーターカールコードにストレートハンドピースを接続する。
- (4) 正逆回転切換スイッチを上下に位置させ、正回転もしくは逆回転の設定をする。(スイッチを真ん中にするとモーター停止状態となるため、駆動しない)
- (5) VAR/HI モード切換スイッチを VAR または HI に設定する。VAR モードを選択時、電源&ボリュームダイヤルで、回転速度を調整する。HI モードを選択時、電源を ON にすると同時に最高回転速度 (30,000rpm) で作動する。
- (6) 電源&ボリュームダイヤルを右方向に回すと、「カチッ」と音がして電源が ON になり作動する。それと同時に、

動作ランプが一時的に赤色点灯し、直ちに緑色に変わり作動状態になる。動作ランプは、緑色点灯状態が維持される。

- (7) 作業が終了した際には、電源&ボリュームダイヤルを「カチッ」と音が鳴るまでしっかりと回し、電源を OFF にする。
- (8) 電源が OFF になると、動作ランプの点灯状態が消灯する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】*

- (1) 研削材の交換やチャックを開く際には電源を切ること。
- (2) チャックを開いた状態でモーターを回転させないこと。
- (3) 研削材を使用する際には、チャックの底に当たるまで差込み、ハンドルをロック方向に回して (2 段階目) 研削材が確実に装着されていることを確認すること。
- (4) 使用時には回転速度を低速から始め、指定されている許容回転速度以下で使用する。
- (5) ディスク状の研削材を使用する際は、低い回転速度で使用する。
- (6) 長時間の使用によりモーターハンドピースが熱を持った場合には、一旦使用を中止し、熱が冷めるまで作動させないこと。
- (7) 使用しない時もバー等 (テストバー含む) を装着しておくこと。

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。[呼吸による粉塵の吸入を防ぐ]
- (2) 保護めがね等を使用すること。[目の損傷を防ぐ]

【保管方法及び有効期間等】

【耐用期間】

製造出荷後 4 年 (正規の保守点検を行った場合に限る)
[自己認証 (外国製造業者データ) による。]

【保守・点検に係る事項】*

詳細については、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【清掃】

- (1) 定期的にストレートハンドピース及びモーターカールコードの清掃を行うこと。付着した粉塵などを清掃する場合は必ず柔らかい布等を使用して拭き取り、エアーを用いた清掃はしないこと。
- (2) ストレートハンドピースへの注油は行わないこと。
- (3) 清掃の際にベンジン、シンナーは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：セシン Saeshin Precision Co., Ltd.

国名：大韓民国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020 (無料)

Fax 番号：0800-222-6480 (無料)

E-mail：e-customer@morita.com

取扱説明書を必ずご参照ください。