

ヴァリオマルチ印象コーピング

再使用禁止

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

- 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品の形状は下図の通りであり、凹凸部が 4 つある。
凸部（リテンションリング）は 2.0 mm、凹部は 1.5 mm 幅、全長は 18 mm である。

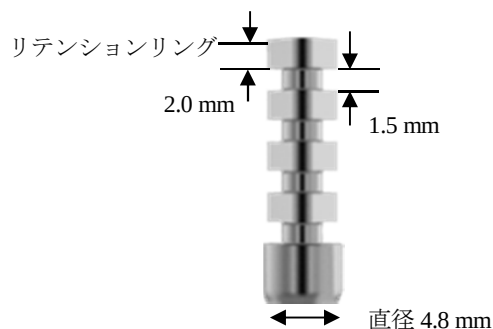

【体に接触する部分の主な組成】

アルミニウム

【原理】

口腔内に装着された専用のアバットメントに本品を装着し、精密印象材を用いてオープントレー法の手順で印象採得を行うことにより、口腔内のアバットメントの位置を正確に作業用模型に移しかえる。

【使用目的又は効果】

本品は、S P I ヴァリオマルチを使用する際の印象採得時に使用する。

【使用方法等】*

【使用方法】

- 口腔内に装着された S P I ヴァリオマルチに本品を装着し、印象コーピングスクリュー直径 3.5 mm 用で固定する。
- 精密印象材を用いてオープントレー法の手順で印象採得を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- インプラントのプラットフォームの直径に関わらず直径 3.5 mm 用の印象コーピングスクリューを使用すること。
- 必要に応じて本品をカットして使用する際は、必ず最低 1 つ凸部（リテンションリング）を残すこと。
- 本品をカットして使用する場合には断面を滑らかな面に整えること。
- 正確に印象採得を行うため、インプラントとアバットメントの接合部分に損傷を与えないこと。
- オープントレー法を用いての印象採得を行うため、個人トレーを作製し、本品を固定するスクリューが貫通するための穴を予め空けておくこと。

【保守・点検に係る事項】

【滅菌】

- 使用前に、高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名：スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com