


機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 歯科咬合紙用ピンセット 31813000
(舌圧子 14066000)

TNG 咬合紙ホルダー

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、咬合紙を保持する部分と舌を保護するカーブ（舌圧子）部を有する咬合紙用ピンセットである。

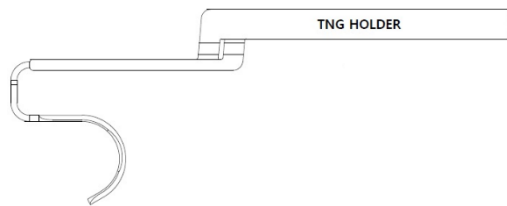

【寸法】

全長：161.2mm

幅：62.5mm

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼

【原理】

2つのバネ性の作業部に咬合紙を挟み、カーブ部に舌を位置させて使用する。

【使用目的又は効果】

本品は、咬合紙を保持するために用いる。また、舌を移動させて検査を容易にするのに用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) ハンドル部を持ち、咬合紙をカーブ（舌圧子）部のスリット上端まで差し込むようにセットし、保持する。
- (2) 舌をカーブ部に位置させて使用する。

【保守・点検に係る事項】

【洗浄】

- (1) 重なりあう部分を完全に開いて洗浄すること。

【消毒】

- (1) 防錆効果のある薬液で薬液消毒を行うこと。
- (2) 腐食の原因となるため、次亜塩素酸ナトリウム、フェノール等は使用しないこと。

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
- (2) 滅菌中は、他のインスツルメントとの接触を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：オソン OSUNG MND CO., LTD.

国名：大韓民国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com