

トーメン スキャンアバットメント

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

- アレルギー発症の可能性のある患者に使用しないこと
[金属アレルギーの発症]


【形状・構造及び原理等】*

【形状・構造】


本品の形状は下図のとおりである。

直径は、対応する SPI システムインプラント又はイニセルインプラントに合わせて、直径 3.5 mm 用、4.0 mm 用、4.5 mm 用、5.0 mm 用、6.0 mm 用の 5 種類がある。

- 1) 3.5 mm 用、4.0 mm 用、4.5 mm 用

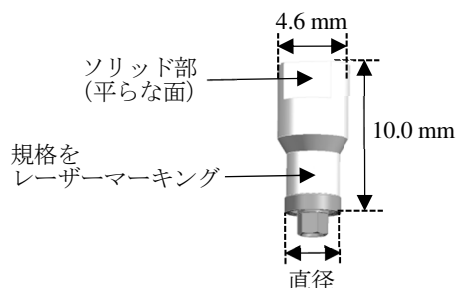

- 2) 5.0 mm 用、6.0 mm 用

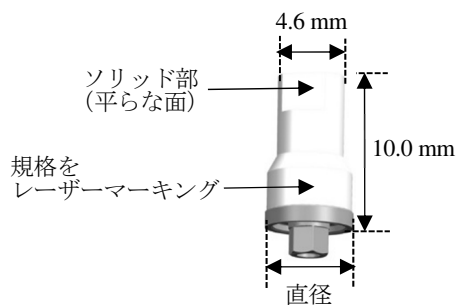

社内規格	直径
3.5	3.6
4.0	4.1
4.5	4.6
5.0	5.1
6.0	6.1

(単位：mm)

【体に接触する部分の主な組成】

原材料 : ステンレス鋼
コーティング : シリコーンポリエステル

【原理】

本品を作業模型上のアナログ、または口腔内でインプラント体に装着・固定し、スキャナーでデジタル印象採得し、インプラントの正しい位置を CAD/CAM（コンピューター支援設計・製造ユニット）に取り込む。

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計に用いる。

【使用方法等】*

【使用方法】

- 本品を作業模型上のアナログ、または口腔内でインプラントに装着し、印象コーピングスクリューで固定する。
- スキャナーでデジタル印象採得し、データを CAD/CAM（コンピューター支援設計・製造ユニット）に取り込む。

【組み合わせて使用する医療機器】

本品は以下と組み合わせて使用する。

販売名	承認番号／届出番号
SPI システムインプラント	22000BZX01433000
イニセルインプラント	30200BZX00086000
印象コーピング（スクリュー）	27B1X00109000219

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 本品の加工・改造は行わないこと。
- ソリッド部（平らな面）が頬側もしくは唇側、または舌側面に位置するよう配置し、スキャナーではっきりと読み取れるようにすること。
- 鉗子等の使用または落下によって本品表面を損傷しないこと。
- 使用前に、本品に摩耗や損傷が無いことを確認すること。
- 口腔内での落下に注意すること。[誤飲を防ぐ]
- 本品を装着する際は、手指で締め付けること。[過度な締め付けによるインプラントの破損を防ぐ]

【保管方法及び有効期間等】

【保管の条件】

強い光や熱にさらされる場所に保管しないこと。[変質のおそれがある]

【保守・点検に係る事項】

【滅菌】

- 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
- 138℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーメン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名：スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com