


機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

S P I 除去用ドリルガイドシリンダー

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品には、サイズ（寸法）の違いにより以下の 5 種類がある。

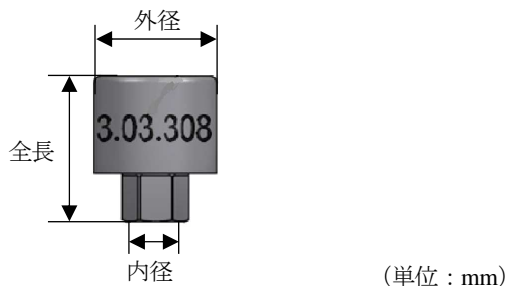

規格	内径	外径	全長
3.5mm 用	1.4	3.7	4.5
4.0mm 用	1.6	4.4	4.8
4.2mm 用		5.2	
5.0mm 用		6.2	
6.0mm 用			

（単位：mm）

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼

【原理】

インプラント体に装着し、使用する。

【使用目的又は効果】

S P I システムインプラント又はイニセルインプラントを除去する際の外科手術に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 本品を使用するインプラントの種類別プラットフォームサイズは下表のとおりである。

（単位：mm）

プラットフォーム 種類	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
エレメント	3.5 用	4.0 用	4.2 用	5.0 用	6.0 用
コンタクト	3.5 用	4.0 用	4.2 用	5.0 用	5.0 用
ワнтаイム	—	—	—	4.2 用	5.0 用

- 本品を上部構造物に取り除かれた状態のインプラント体のインターナル HEX 部に装着し、アバットメントスクリー（販売名：S P I アバットメント、承認番号：21800BZY10048000）で固定する。
- S P I インプラント除去用ドリル（届出番号：27B1X00109000223）を用いて、埋入されたインプラント体の長さまで削合する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 再使用はしないこと。[一度使用したものは変形・破損の恐れがある。]
- 使用前に、本品に変形・破損がないことを確認すること。

【保守・点検に係る事項】

【滅菌】

- 使用前に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG
Thommen Medical AG

国名：スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E - m a i l : e-customer@morita.com