

機械器具 2 医療用照明器
一般医療機器 汎用歯科用照明器 (JMDN コード:12351000)

タッチレス 2 ライト

【警告】


- ランプ点灯中及び消灯直後は、ランプ・リフレクター・金属部分が高温になっているので、触れないこと。やけどのおそれがある。
- 照射位置の調整は、リフレクター固定つまみを必ず緩めて行うこと。リフレクター・ランプカバーを持って無理な力を加えると、リフレクター・ランプカバー・ライトホルダーが破損し、人に危害を与えるおそれがある。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本装置はライトポール、ライトアーム、ライトホルダー、リフレクター、リフレクター固定つまみ、ハロゲンランプ、ランプカバーなどにより構成する。

(外観図)

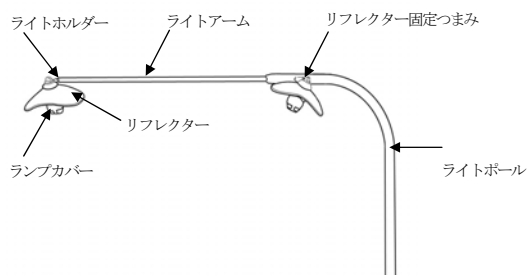

2. 寸法、質量

- 寸法: 幅 215×奥行 170×高さ 90mm (リフレクター部)
- 質量: 約 10kg

3. 電氣的定格 **

- 電源電圧: AC14V
- 周波数: 50/60Hz
- 入力電力: 100VA
- 電撃に対する保護: クラス分類は接続する歯科用ユニットによる
装着部は無

4. 原理

ハロゲンランプの光源をリフレクターで集光、反射、透過し、前方のみに有用な光を照明する。

【使用目的又は効果】*

使用目的

歯科診療の際、患者さんの口腔内を照明する。

【使用方法等】**

使用環境条件 **

- 温度: 10~35℃
- 湿度: 30~75%RH (結露しないこと)
- 気圧: 700~1,060hPa

1. 設置方法、組立方法

本装置の取付、設置は専門の担当者 (当社、又は、当社指定の業者) が行う。

2. 使用方法

歯科用ユニットのライトスイッチでライトを ON/OFF する。

【使用上の注意】*

1. 警告

【警告】の項に記載の通り

2. 重要な基本的注意 *

- リフレクターの清掃には、ベンジンやシンナーなどの溶剤及び化学ぞうきんは使用しないこと。
- ランプをあまり強い力で押込んだり、斜めに押込むと、2 本のプラグが破損することもあるので注意すること。
- タッチレス 2 ライト用のハロゲンランプを使用すること。他のランプを使用すると、ランプの破損、機器の故障をまねくおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法 **

- 温度: -10~70℃
- 湿度: 10~85%RH (結露しないこと)
- 気圧: 700~1,060hPa
- 直射日光に長時間さらされないこと

2. 耐用期間

製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り、10 年間 (自己認証による)。

【保守・点検に係る事項】*

- 日常の点検は取扱説明書に従って行う。
- 医療機器の使用、保守の管理責任は、使用者 (医療機関、病院、診療所) 側にある。
- 保守点検は使用者側で行うのが原則であるが、実施されない場合には、医療機器修理業などの有資格者に外部委託することが認められている。
- 本装置の保守点検は下記に基づき、6 か月ごとに行う。

「使用者側が行う保守点検」

- ハロゲンランプのちらつき、照度変化を目視にて確認する。
- リフレクターにくもりやごみが付着していないか目視にて確認する。
- ライトアーム、ねじ部に緩みやがたつきがないか確認する。

「業者に委託する保守点検」

- ランプの電源電圧を確認する。

- 交換部品、消耗部品については、取扱説明書に交換部品、消耗部品を記載しているので、交換時期、消耗割合により交換する。

※ ユニットに付属されている「歯科用ユニット等を使う人のための安全ノート」の〔付〕安全と機能保持可能な標準耐用期間の 2.定期点検の項も使用前に必ず読むこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者・製造業者:

株式会社 モリタ製作所
京都府京都市伏見区東浜南町 6 8 0 番地
0 7 5 - 6 1 1 - 2 1 4 1
専用フリーダイヤル: 0 1 2 0 - 8 0 2 0 3 6
(受付 月~金 8:30 ~ 17:00)
e-mail: customer@jmorita-mfg.co.jp