

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN16350000


Astek トランスフォームトレー

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

* [形状・構造]

有歯上顎用

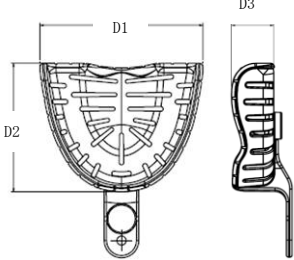

有歯下顎用

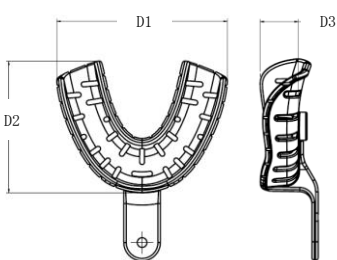

サイズ	D1	D2	D3
下顎ラージ	74 mm	60 mm	16 mm
上顎ラージ	79 mm	60 mm	21 mm
下顎ミディアム	70 mm	54 mm	15 mm
上顎ミディアム	71 mm	56 mm	18 mm
下顎スモール	66 mm	50 mm	14 mm
上顎スモール	66 mm	49 mm	20 mm

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる

【使用方法等】

- 1) トレーを口腔内で試適し、トレーの形を変える必要のある箇所を確認すること（無歯顎の骨隆起部や有歯顎の臼歯部幅など）。
- 2) 該当箇所を 70 度のお湯に 20 秒間浸漬し、トレーを柔らかくさせて変形可能な状態にすること。
- 3) トレーを適切な形に変形させ、トレーが硬くなるまでその形を約 10 秒間維持すること（流水にトレーを浸漬しても良い）。
- 4) 冷却するとトレーは変形させた形をしっかりと維持し、また強度を保つことができる。このトレーを変形させる工程は適切な形を得るまで繰り返すことができる。
- 5) 形を調整したトレーで印象採得を行うこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品を再使用しないこと。
- 2) 口腔内で本品の削合を行わない事

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]


- 1) 本品は清潔で高温多湿にならない場所にて保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売業者： (株)モモセ歯科商会
住所： 〒543-0054
大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6 番 35 号
電話番号： 06-6773-3333
緊急連絡先： (株)モモセ歯科商会 推進事業部 ASU
電話番号： 06-6773-4175
ファックス： 06-6773-0927
製造業者：
ASTEK INNOVATIONS LIMITED

販売業者の連絡先：（空欄です。使用者が下に記載してください）

*無歯上顎用

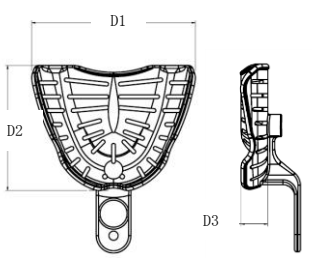

*無歯下顎用

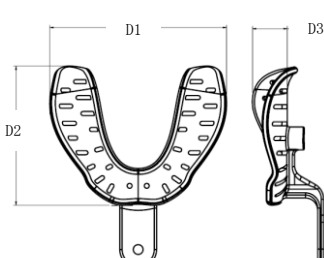

サイズ	D1	D2	D3
下顎ラージ	76 mm	60 mm	17 mm
上顎ラージ	76 mm	59 mm	13 mm
下顎ミディアム	72 mm	57 mm	14 mm
上顎ミディアム	71 mm	54 mm	12 mm
下顎スモール	64 mm	53 mm	13 mm
上顎スモール	65 mm	49 mm	10 mm

[材質]：プラスチック