

機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド 16195000


トクヤマ セクショナルマトリックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品又はステンレス鋼（金属）に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

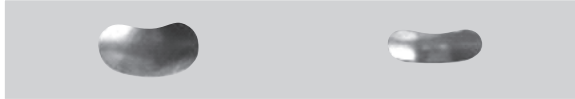

材質：ステンレスチール
厚み：38ミクロン

＜原理＞

本品を挿入することにより歯間部にわずかな物質的空間を与える。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込める歯科用器具である。歯科用マトリックスの保持に用いられるリング状の歯科用マトリックスリテイナ及び／又は歯科用マトリックスウェッジにより所定の位置に固定される。

＜効果＞

修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。

【使用方法等】

＜装着する時＞

1. 本品のサイズを選び、修復する歯牙の隣接面の湾曲部を回復できるように装着します。
2. 本品をリング状のマトリックスリテイナ及び／又はマトリックスウェッジで固定します。

＜取り外す時＞

1. マトリックスリテイナ及び／又はマトリックスウェッジを外します。
2. 鉗子やピンセットを用いて本品を外します。

※併用する製品については、それぞれの添付文書もあわせて参照してください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 使用の際は、必ずラバーダムを装着してください。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ・誤飲には十分注意すること。
 - ・本品の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせる／受けること。
 - ・本品の使用に際しては、外観上の損害、各部位の緩み等がないか、確認すること。
 - ・歯肉および口腔内に痛みや傷又は腫れがある場合には、使用しないこと。
 - ・長時間の使用は避けること。歯肉や噛み合わせなどに影響を及ぼすことがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【包装】

トクヤマ セクショナルマトリックス L：100枚入り
トクヤマ セクショナルマトリックス S：100枚入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	ZEST ANCHORS LLC (ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国	アメリカ合衆国

発売元	株式会社トクヤマデンタル
住所	〒110-0016東京都台東区台東1-38-9
電話番号	(フリーダイヤル) 0120-54-1182