


機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 38782000

トクヤマ リングプライヤー

【形状・構造及び原理等】

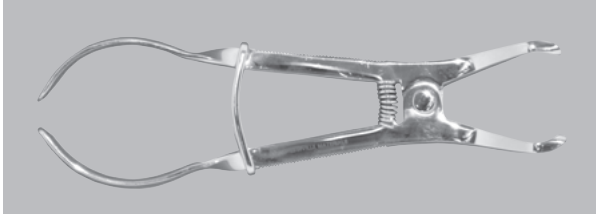

材質：ステンレススチール

＜原理＞

てこの原理により、力点（グリップ部）に力を加え作用点（先端部）で作業を行う。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、口腔内で修復材または成形器具を取り付けるために用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

＜装着する時＞

1. 本品の先端部をリング状のマトリックスリテイナ（当社品「トクヤマ セクショナルリング」：別売）またはフープ状のマトリックスウェッジ（当社品「トクヤマ エラスティックウェッジ」：別売）の把持部に挿入します。
2. 本品のグリップを握り、リング状マトリックスリテイナを広げ、又はフープ状マトリックスウェッジを引き伸ばし、これらを所定位置に装着します。

※広げ過ぎに注意してください。

＜取り外す時＞

3. リング状マトリックスリテイナは、装着時と同様に広げて、取り外します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ・本品の使用にあたっては、滅菌された状態で使用すること。

2) 重要な基本的注意

- ・本品の使用にあたっては、外観上の損害、各部位の緩み等がないか、確認を行うこと。
- ・正常かつ安全に作動することなどを確認するため、後述の方法に従って保守点検を行うこと。
- ・使用にあたっては、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〔滅菌条件等〕

- ・使用後は速やかに器具に付着した唾液などを除去すること。
- ・表面をアルコール等を用いて拭き、十分乾燥させてから滅菌バック等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃ 20分以上）すること。
- ・薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあります。

※変色することがありますが、品質に影響はありません。

【包装】

トクヤマ リングプライヤー 1本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	ZEST ANCHORS LLC (ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国	アメリカ合衆国
発売元	株式会社トクヤマデンタル
住所	〒110-0016東京都台東区台東1-38-9
電話番号	(フリーダイヤル) 0120-54-1182