


機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 38782000

トクヤマ マトリックスリムーバー

【形状・構造及び原理等】

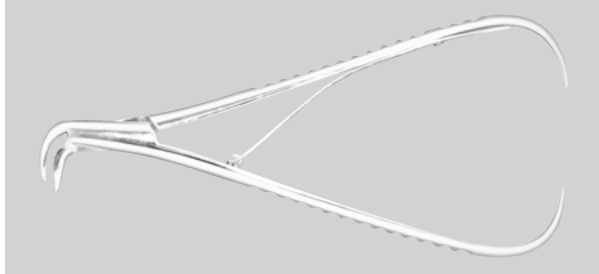

材質：ステンレススチール

＜原理＞

てこの原理により、力点（グリップ部）に力を加え作用点（先端部）で作業を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用マトリックス等の小物を把持・保持するために用いる小型ペンチである。

【使用方法等】

1. 本品のグリップを軽く持ち、先端部が開いていることを確認します。
2. 本品の先端部の開放部分で、目的物を挟みます。
3. グリップに軽く力を加え、しっかりと目的物を把持し持ち上げます。

※力の加え過ぎに注意してください。目的物が変形する可能性があります。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ① 歯科用マトリックスの“装着”の際には使用しないでください。僅かな力でも変形する恐れがあります。
- ② 手や皮膚、粘膜などを挟まないように注意してください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・ 本品の使用にあたっては、滅菌された状態で使用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・ 本品の使用にあたっては、外観上の損傷、各部位の緩み等がないか、確認すること。
 - ・ 正常かつ安全に作動すること等を確認するため、保守点検を行うこと。
 - ・ 使用にあたっては、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

〔滅菌条件等〕

- ・ 使用後は速やかに器具に付着した唾液などを除去すること。
- ・ 表面をアルコール等を用いて拭き、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃ 20分以上）すること。
- ・ 薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあります。

※変色することがありますが、品質に影響はありません。

【包装】

トクヤマ マトリックスリムーバー 1本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	ZEST ANCHORS LLC (ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国	アメリカ合衆国

発売元	株式会社トクヤマデンタル
住所	〒110-0016東京都台東区台東1-38-9
電話番号	(フリーダイヤル) 0120-54-1182