


機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド （16195000）
イーザーマトリックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

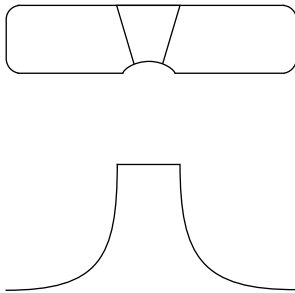

材質：ステンレス鋼
厚さ：50 ミクロン

＜原理＞

歯間隣接部に本品を装着して隔壁となることにより、修復材が適切な形になるように一般的輪郭を付ける。

【使用目的又は効果】

形成・修復時に隣接する歯を保護し、修復する歯に充填する修復材が適切な形になるように一般的輪郭を付けるために用いる。

【使用方法等】

＜使用前に＞

- ① 本品を使用する前に、必ず洗浄、消毒、滅菌を行うこと。また、使用前に、破損、ヒビ等がないか確認すること。
- ② 強酸性の洗浄液や消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。
- ③ 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。

＜装着方法＞

1) 乳臼歯部への装着法

- ① 屈曲された辺縁部の短いほうを咬合面側にし、屈曲部が舌側に位置するように歯間隣接面部に適合させてください。
- ② さらにバンドを頬側方向に少し強めに引っ張って歯頸部に歯科用マトリックスウェッジを挿入してください。

2) 乳前歯部への装着法

乳前歯部に装着するときも、屈曲された辺縁部の短いほうを切縁側にして、屈曲部が舌側に位置するように装着し、唇側より歯科用マトリックスウェッジを挿入して固定するとともに歯面への適合を完璧にするように心がけます。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① 本品の飛散などによる誤飲・ケガに注意すること。
- ② 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

- ③ 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
- ④ 再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

未使用のものは、プラスチックケースに入れ、清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	*03-5808-9350
製造業者	山添製作所