

機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド（16195000）
（歯科用マトリックスリテイナ（33204000）、歯科用マトリックスウェッジ（16370000）、
歯科用充填・修復材補助器具（38782000））

トクヤマ ClassII マトリックスキット

再使用禁止

- 【禁忌・禁止】
- 1. 本品又はステンレス（金属）／ポリウレタンに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - 2. 再使用禁止:「トクヤマ セクショナルマトリックス」、「トクヤマ エラスティックウェッジ」は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

① トクヤマ セクショナルマトリックス



材質：ステンレススチール
厚み：38ミクロン

＜原理＞
本品を挿入することにより歯間部にわずかな物質的空間を与える。

② トクヤマ セクショナルリング



材質：ステンレススチール

＜原理＞
リングの復元力により、把持脚部分で「トクヤマ セクショナルマトリックス」や「トクヤマ エラスティックウェッジ」を保持する。

③ トクヤマ エラスティックウェッジ




種類	高さ
緑	2.0mm
黄	2.6mm
青	3.2mm

- 1) 形状：フープ状
- 2) 材質：ポリウレタン

＜原理＞
本体の弾性力により、歯頸部に設置した際に歯を分離させる。

④ トクヤマ リングプライヤー

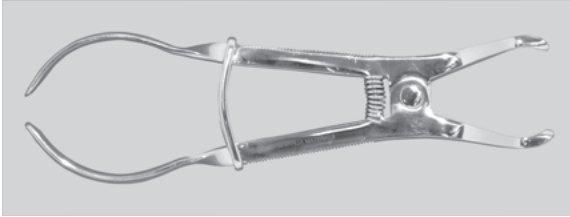

材質：ステンレススチール

＜原理＞
てこの原理により、力点（グリップ部）に力を加え作用点（先端部）で作業を行う。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞
本キットは、コンポジットレジンによる臼歯部Ⅱ級窩洞の修復において、失われた隣接面の輪郭形成や隣接歯とのコンタクトの回復のために用いられる。

＜効能または効果＞
修復する歯の形状のほか、隣接する歯の位置に応じて適切な形になるように輪郭をつける。

【使用方法等】

- ＜装着する時＞
- ① 「トクヤマ セクショナルマトリックス」のサイズを選び、修復する歯牙の隣接面の湾曲部を回復できるように装着します。
 - ② 「トクヤマ エラスティックウェッジ」のサイズを選択します。
 - ③ 「トクヤマ リングプライヤー」をウェッジのフープ部にしっかりと挿入します。
 - ④ プライヤーのグリップを握ってウェッジを広げて歯間部に挿入します。
 - ⑤ 「トクヤマ セクショナルリング」の外向き、内向きの何れかを選択します。
 - ⑥ 選択した「トクヤマ セクショナルリング」を「トクヤマ リングプライヤー」を用いて広げ、「トクヤマエラスティックウェッジ」の上部または背後から装着します。

- ＜取り外す時＞
- ① 「トクヤマ リングプライヤー」を用いて「トクヤマ セクショナルリング」を外します。
 - ② 「トクヤマ エラスティックウェッジ」の端を引き伸ばし、中心部から歯科用はさみなどで切り取ります。
 - ③ 残された「トクヤマ エラスティックウェッジ」の破片を取り外した後、「トクヤマ マトリックスリムーバー」（別売）やピンセットを用いて「トクヤマ セクショナルマトリックス」を外します。
- ※別売品を併用する場合は、その添付文書もあわせて参照してください。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 使用の際は、必ずラバーダムを装着してください。
- 2) 「トクヤマ セクショナルリング」は、広げ過ぎにより元の状態に戻らなかったり、十分に機能しなくなる場合があります。リングが元の状態に戻らない場合は、三嘴鉗子等を用いて締め戻して使用してください。使用回数、時間と共に劣化しますので、その際には交換してください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・「トクヤマ セクショナルリング」、「トクヤマ リングブライヤー」の使用にあたっては、滅菌された状態で使用すること。
 - ・「トクヤマ セクショナルマトリックス」、「トクヤマ セクショナルリング」及び「トクヤマ リングブライヤー」を使用の際は、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。また、「トクヤマ エラスティックウェッジ」は過度の引き伸ばしは避けること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・誤飲には十分注意すること。
 - ・本品の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせる／受けること。
 - ・使用にあたっては、保護グローブ、保護メガネ、保護マスク等を使用すること。
 - ・「トクヤマ リングブライヤー」の使用に際しては、外観上の損害、各部位の緩み等がないか、確認すること。
 - ・歯肉および口腔内に痛みや傷又は腫れがある場合には、使用しないこと。
 - ・長時間における使用は、歯肉や噛み合わせなどに影響を及ぼすことがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

〔滅菌条件等〕

- ・使用後は速やかに器具に付着した唾液などを除去すること。
- ・表面をアルコール等を用いて拭き、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃ 20分以上）すること。
- ・薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあります。
※変色することがありますが、品質に影響はありません。

【包装】

〔トクヤマ ClassⅡマトリックスキット〕

トクヤマ セクショナルマトリックス（L・S） 各10枚
トクヤマ セクショナルリング 内向き・外向き 各1個
トクヤマ エラスティックウェッジ 緑・黄・青 各15個
トクヤマ リングブライヤー 1本

〔単品〕

トクヤマ セクショナルマトリックス L : 100枚入り
トクヤマ セクショナルマトリックス S : 100枚入り
トクヤマ セクショナルリング 内向き・外向き : 各1個入り
トクヤマ エラスティックウェッジ 緑 : 85個入り
トクヤマ エラスティックウェッジ 黄 : 85個入り
トクヤマ エラスティックウェッジ 青 : 85個入り
トクヤマ リングブライヤー : 1個

〔別売〕

トクヤマ マトリックスリムーバー : 1本
トクヤマ セクショナルリングL 内向き・外向き : 各1個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	ZEST ANCHORS LLC (ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国	アメリカ合衆国
発売元	株式会社トクヤマデンタル
住所	〒110-0016東京都台東区台東1-38-9
電話番号	(フリーダイヤル) 0120-54-1182