

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド （16195000）
（歯科用マトリックスウェッジ（16370000）、歯科用マトリックスリテイナ（33204000））
コンタクトマトリックスシステム

コンタクトマトリックス、コンタクトウェッジ 再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。
2. コンタクトマトリックス、コンタクトウェッジは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本キットは以下の構成部品がある。

コンタクトマトリックス


ソフト L	ソフト S
	

厚さ：38 ミクロン 材質：ステンレス鋼

＜原理＞

歯間隣接部に本品を装着して隔壁となることにより、修復材が適切な形になるように一般的輪郭を付ける。

コンタクトリング

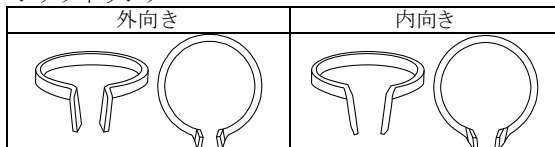

材質：ステンレス鋼

＜原理＞

リングの復元力により、把持脚部分で歯科用マトリックスバンドや歯科用マトリックスウェッジを保持する。

コンタクトウェッジ

M イエロー	S グリーン
	
高さ：2.60mm	高さ：2.00mm

形状：フープ状 材質：ポリウレタン

＜原理＞

本体の弾性力により、歯頸部に設置した際に歯を分離させる。

【使用目的又は効果】

形成・修復時に隣接する歯を保護し、修復する歯に充填する修復材が適切な形になるように一般的輪郭を付けるために用いる。

【使用方法等】

＜装着する時＞

- ①[コンタクトマトリックス]の種類及びサイズを選び、修復する歯牙の隣接面の湾曲部を回復できるように装着します。
- ②[コンタクトウェッジ]の種類を選び、歯科用充填・修復材補助器具（販売名：コンタクトブライヤー）又は汎用歯科用ラバーダムクランプ鉗子で伸ばし、歯間部に装着して、[コンタクトマトリックス]を固定します。
必要に応じて、[コンタクトリング（外向き又は内向き）]を選び、歯科用充填・修復材補助器具（販売名：コンタクトブライヤー）や汎用歯科用ラバーダムクランプ鉗子などで広げ、[コンタクトウェッジ]の上部や背部に装着します。

＜取り外す時＞

- ①[コンタクトリング]を歯科用充填・修復材補助器具（販売名：コンタクトブライヤー）や汎用歯科用ラバーダムクランプ鉗子を用いて外します。
- ②[コンタクトウェッジ]を歯科用充填・修復材補助器具（販売名：コンタクトブライヤー）や汎用歯科用ラバーダムクランプ鉗子を用いて、端をわずかに伸ばし、汎用歯科用はさみなどで切り取り、外します。
- ③歯科用充填・修復材補助器具（販売名：メガグリップフォーセップス）を用いて、[コンタクトマトリックス]を外します。

※[コンタクトウェッジ]及び[コンタクトリング]を併用することにより強い離開力が期待できます。
※別売品を併用する場合は、其々の添付文書もあわせてご参照ください。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ①使用の際は、必ずラバーダムを装着してください。
- ②本品は、広げ過ぎにより元の状態に戻らなかったり、十分に機能しなくなる場合があります。リングが元の状態に戻らない場合は、三嘴鉗子等を用い締め戻してご使用ください。使用回数、時間と共に劣化しますので、その際には交換してください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①誤飲には十分注意すること。
 - ②本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
 - ③本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
 - ④歯肉および口腔内に痛みや傷又は腫れがある場合には、使用をしないこと。
 - ⑤長時間における使用は、歯肉や噛み合わせなどに影響を及ぼすことがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

＜コンタクトリングに係る保守・点検事項＞

しばらく使用しなかった[コンタクトリング]を再使用するときは、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。

〔滅菌条件等〕

- ・使用後は速やかに器具に付着した唾液等を除去すること。
 - ・[コンタクトリング]は外層を拭き、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上）すること。
 - ・薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
 - ・薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがあります。
- ※変色することがありますが、品質に影響はございません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造業者	ZEST ANCHORS LLC
	(ゼスト アンカーズ エルエルシー)
製造国	アメリカ合衆国