


**機械器具 50 開創又は開孔用器具**  
**一般医療機器 歯科用開口器（70949000）**  
**チークリトラクター**

**【禁忌・禁止】**

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。

**【形状・構造及び原理等】**

&lt;形状&gt;

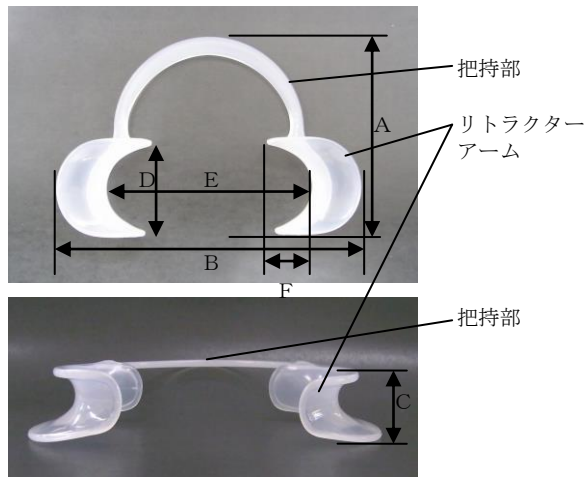

| 種類   | 寸法     |         |        |        |        |        |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      | A      | B       | C      | D      | E      | F      |
| スモール | 81.0mm | 113.0mm | 15.0mm | 35.0mm | 78.0mm | 20.0mm |
| ラージ  | 85.0mm | 127.0mm | 19.0mm | 36.5mm | 90.0mm | 18.3mm |

材質：ポリプロピレン

&lt;原理&gt;

リトラクターアームにより、開口状態を保持する。

&lt;品目仕様等&gt;

耐熱温度：135℃

**【使用目的又は効果】**

歯科治療で患者の開口状態を保持する。

**【使用方法等】**

1. 適切なサイズを選択します。
2. 把持部を把持し、開口した口腔内にリトラクターアームを押さえるようにして挿入します。
3. 使用後は、把持部を把持して口腔内から本品を取り外します。

※印象採得時に本品を使用する場合は、本品を口腔内に挿入後、印象採得用トレーを口腔内に挿入し、印象材が硬化する前に本品を取り外してください。

**【使用上の注意】**

- 1) 重要な基本的注意
  - ① 本品の使用には十分注意を払うこと。
  - ② 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
  - ③ 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
  - ④ リトラクターアームの形態を変更させたり、過度の加圧で使わないこと。
  - ⑤ 使用後は、感染防止等に配慮して安全な方法で滅菌すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

〔保管方法〕

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 寒冷条件下での保管は、本品に亀裂や破損を生じることがあるので避けること。

**【保守・点検に係る事項】**

- 1) 汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 2) 超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ちやすいようにバスケットなどに収納すること。
- 3) 洗浄剤の残留が無いように充分すすぎをすること。
- 4) 洗浄後は、直ちに乾燥すること。
- 5) 滅菌前に汚れ、傷、曲がり、破損等の異常がないか点検すること。
- 6) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。

〔滅菌条件等〕

- ・使用後は速やかに器具に付着した唾液等を除去すること。
  - ・紫外線滅菌、高圧アルコール蒸気滅菌、エチレンオキシドガス（EOG）による滅菌、乾熱滅菌による滅菌は避けること。
  - ・本品は、外層を拭き、十分乾燥させてから滅菌パック等に入れ、オートクレーブ滅菌（130～135℃、3～5分）すること。
  - ・薬液洗浄を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
- 薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがある。
- ・薬液への長時間の浸漬は避けること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社モリムラ  
 電話番号 03-5808-9350  
 製造業者 ダエソン メディカル シーオー  
 (DAESEUNG MEDICAL Co.)  
 製造国 大韓民国