

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用ワイヤ（16204000）
レオーネ ステンレス ワイヤー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- * 1. 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- * 2. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】


<材質>

- ・クロム系ステンレススチール合金

<形状>

- ・ワイヤー断面の形状は、丸型及び角型の 2 種類がある。

丸型（ラウンド）

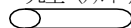

角型（スクエア・レクタングュラー）




- ・ワイヤー形状は、ストレート及びプリフォームアーチワイヤーの 2 種類がある。

ストレートワイヤー



アーチワイヤー
上顎用

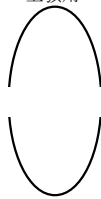

下顎用

<品番>

レオワイヤー スプール タイプ ラウンド

直径	長さ表示タイプ		重量表示タイプ (500g)	
	全長	品番	重量	品番
0.50	50.0M	C0400-05	500g	C0450-05
0.60	40.0M	C0400-06	500g	C0450-06
0.70	25.0M	C0400-07	500g	C0450-07
0.80	20.0M	C0400-08	500g	C0450-08
0.90	10.0M	C0400-09	500g	C0450-09
1.00	10.0M	C0400-10	500g	C0450-10
1.10	10.0M	C0400-11	500g	C0450-11
1.20	10.0M	C0400-12	500g	C0450-12
1.30	10.0M	C0400-13	500g	C0450-13
1.40	10.0M	C0400-14	500g	C0450-14

レオワイヤー ストレート タイプ ラウンド

直径		硬さ		
インチ	(mm)	ハード	スプリング ハード	エキストラ ハード
.014	(0.35)	C8080-14	C8180-14	C8380-14
.016	(0.40)	C8080-16	C8180-16	C8380-16
.018	(0.45)	C8080-18	C8180-18	C8380-18
.020	(0.50)	C8080-20	C8180-20	C8380-20
.032	(0.81)	C8080-32		
.036	(0.91)	C8080-36		
.040	(1.01)	C8080-40		
.045	(1.14)	C8080-45		
.051	(1.29)	C8080-51		

・全長:355.6mm

レオワイヤー ストレート タイプ スクエア・レクタングュラー

全長:355.6mm

縦 × 横		硬さ	
インチ	(mm)	スプリング ハード	エキストラ ハード
.016 × .016	(0.40 × 0.40)		C8116-16
.017 × .017	(0.43 × 0.43)		C8117-17
.016 × .022	(0.40 × 0.55)	C8022-16	C8122-16
.017 × .022	(0.43 × 0.55)	C8022-17	C8122-17
.017 × .025	(0.43 × 0.63)	C8025-17	
.018 × .022	(0.45 × 0.55)	C8022-18	C8125-17
.018 × .025	(0.45 × 0.63)	C8025-18	C8125-18
.019 × .025	(0.48 × 0.63)	C8025-19	C8125-19
.021 × .025	(0.53 × 0.63)		C8125-21
.021 × .028	(0.54 × 0.71)	C8028-21	C8128-21

オーソリアン ワイヤー スプール タイプ ラウンド

直径		硬さ	
インチ	(mm)	エキストラ スプリング ハード	スーパー ハード ヒート トリート
.012	0.30	C0420-12	
.014	0.35	C0420-14	C0430-14
.016	0.40	C0420-16	C0430-16
.018	0.45	C0420-18	C0430-18
.020	0.50	C0420-20	C0430-20

全長:8M

ツイスト ワイヤー ストレート タイプ ラウンド

直径		
インチ	(mm)	品番
.015	(0.38)	C8580-15
.017	(0.44)	C8580-17
.019	(0.49)	C8580-19
.021	(0.54)	C8580-21



全長:355.6mm

フレックス ワイヤー ストレート タイプ ラウンド

直径		
インチ	(mm)	品番
.015	(0.38)	C8880-15
.017	(0.44)	C8880-17
.019	(0.49)	C8880-19



全長:355.6mm

プリフォーム フレックス アーチワイヤー ラウンド

直径		
インチ	(mm)	品番
.015	(0.38)	C5440-15
.017	(0.44)	C5440-17



全長 168 × 端間距離 58mm

スリー スtrand ツイスト アーチワイヤー スクエア・レクタングュラー

縦 × 横		品番
インチ	(mm)	
.016 × .016	(0.40 × 0.40)	C5541-16



全長 168 ×
端間距離 58mm

エイト スtrand ツイスト アーチワイヤー スクエア・レクタングュラー

縦 × 横		品番
インチ	(mm)	
.017 × .025	(0.43 × 0.63)	C5745-17
.018 × .025	(0.45 × 0.63)	C5745-18



全長 168 ×
端間距離 58mm

プリフォーム スタンダード アーチワイヤー ラウンド

○ 直径			
インチ	(mm)	上顎用	下顎用
.012	0.30	C5110-12	C5150-12
.014	0.35	C5110-14	C5150-14
.016	0.40	C5110-16	C5150-16
.018	0.45	C5110-18	C5150-18
.020	0.50	C5110-20	C5150-20
		全長 168 × 距離 58mm 正中線に黒マーク付。	全長 164 × 距離 54mm、 正中線に赤マーク付。

プリフォーム スタンダード アーチワイヤー スクエア・レクタングル

□ 縦 × 横			
インチ	(mm)	上顎用	下顎用
.016×.016	(0.40×0.40)	C5111-16	C5151-16
.016×.022	(0.40×0.55)	C5112-16	C5152-16
.017×.025	(0.43×0.63)	C5115-17	C5155-17
.018×.025	(0.45×0.63)	C5115-18	C5155-18
.019×.025	(0.48×0.63)	C5115-19	C5155-19
.021×.025	(0.53×0.63)	C5115-21	C5155-21
		全長 170 × 距離 72mm 正中線に黒マ ーク付。	全長 166 × 距離 68mm、 正中線に赤マ ーク付。

プリフォーム ナチュラル アーチワイヤー ラウンド

上顎用 ○ 直径

インチ	(mm)	スモール	ミディアム	ラージ
.014	(0.35)	C3010-16	C3110-14	C3210-16
.016	(0.40)		C3110-16	
.018	(0.45)		C3110-18	
.020	(0.50)		C3110-20	
		全長 164 mm 距離 68 mm	全長 168 mm 距離 72 mm	全長 172 mm 距離 76 mm

下顎用○ 直径

インチ	(mm)	スモール	ミディアム	ラージ
.014	(0.35)	C3050-16 C3050-18	C3150-14	C3250-16 C3250-18
.016	(0.40)		C3150-16	
.018	(0.45)		C3150-18	
.020	(0.50)		C3150-20	
		全長 160 mm 距離 64 mm	全長 164 mm 距離 68 mm	全長 168 mm 距離 72 mm

プリフォーム ナチュラル アーチワイヤー スクエア・レクタングル

上顎用 □ 縦 × 横

インチ	(mm)	スモール	ミディアム	ラージ
.016×.016	(0.40×0.40)	C3012-16	C3111-16	C3212-16
.016×.022	(0.40×0.55)		C3112-16	
.017×.025	(0.43×0.63)		C3112-17	
.018×.025	(0.45×0.63)	C3012-18	C3112-18	C3212-18 C3212-19
.019×.025	(0.48×0.63)	C3012-19	C3112-19	
.021×.025	(0.53×0.63)		C3112-21	
		全長 164mm 距離 68mm	全長 168mm 距離 72mm	全長 172mm 距離 76mm

下顎用□ 縦 × 横

インチ	(mm)	スモール	ミディアム	ラージ
.016×.016	(0.40×0.40)	C3052-16	C3151-16	C3252-16
.016×.022	(0.40×0.55)		C3152-16	
.017×.025	(0.43×0.63)		C3152-17	
.018×.025	(0.45×0.63)	C3052-18	C3152-18	C3252-18 C3250-19
.019×.025	(0.48×0.63)	C3052-19	C3152-19	
.021×.025	(0.53×0.63)		C3152-21	
		全長 160mm 距離 64mm	全長 164mm 距離 68mm	全長 168mm 距離 72mm

プリフォーム パラタルパー ラウンド

距離	品番
34	C0570-34
36	C0570-36
38	C0570-38
40	C0570-40
42	C0570-42
44	C0570-44
46	C0570-46
48	C0570-48
50	C0570-50
52	C0570-52
34-52 アソート キット	C0570-96

○ 直径:0.9mm

プリフォーム リバース ループ パラタルパー ラウンド

距離	品番
34	C0576-34
36	C0576-36
38	C0576-38
40	C0576-40
42	C0576-42
44	C0576-44
46	C0576-46
48	C0576-48
50	C0576-50
52	C0576-52
34-52 アソート キット	C0576-96

○ 直径:0.9mm

プリフォーム アダムス クラスプ

距離	品番
5.0	C0580-05
5.5	C0580-055
6.0	C0580-06
6.5	C0580-065
7.0	C0580-07
8.0	C0580-08
9.0	C0580-09
10.0	C0580-10
11.0	C0580-11
12.0	C0580-12
5.0-12.0 アソート キット	C0580-95

○ 直径:0.7mm

プリフォーム レビアル アーチワイヤー

ループ間距離(mm)	品番
25	C0585-25
28	C0585-28
31	C0585-31
34	C0585-34
37	C0585-37
40	C0585-40
43	C0585-43
46	C0585-46
48	C0585-48
50	C0585-50
25-50 アソートキット	C0585-95

○ 直径:0.8mm

ボール クラスプ

インチ	(mm)	品番
17	(0.7)	C1610-17
18	(0.8)	C1610-18
19	(0.9)	C1610-19

距離(全長) 40mm

<付属品>

クリンパブル クローズドフック G9019-25

	.018	.022
サージカル フック 2.0mm	G9620-18	G9620-22
2.0mm(オープン)	G9650-18	G9650-22

【使用目的又は効果】

本品を、歯面に接着したブラケットのスロットに装着し、結紮して歯列の矯正を行う。

【使用方法等】

<ブラケット等への使用>

- 1) 石膏模型に基づき本品にマーキングペンシルでしるしをつけます。
- 2) ワイヤークッターで本品を切断します。
- 3) プライヤーを用い必要なベンディングを施します。
- 4) ブラケットのスロットやチューブ等に通し、通法により固定します。

【使用方法に関する使用上の注意】

- 1) ワイヤーク径に適したカッターを用いて下さい。
合わない場合カッターに破損を生じることがあります。
- 2) 同じ箇所にも何度もベンディングを施した場合、ワイヤーが切断することがあります。その際、熱を発生することがありますのでご注意ください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
 - ② 本品は再使用しないこと。
 - ③ 変形や変質している製品は、使用せずに弊社までご連絡ください。
 - ④ 装置を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理してください。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ② 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

*【保管方法】

- 1) 本品は40℃未満（但し、結露しない）で保管する。
- 2) 本品は使用前に、塩酸、硝酸等の鉱酸類と一緒に保管しないでください。

【包装】

C0400-05	レオネ Leowire 020	(0.5mm)	ラウンドスプリングハードスプール 50m
C0400-06	レオネ Leowire 024	(0.6mm)	ラウンドスプリングハードスプール 40m
C0400-07	レオネ Leowire 028	(0.7mm)	ラウンドスプリングハードスプール 25m
C0400-08	レオネ Leowire 032	(0.8mm)	ラウンドスプリングハードスプール 20m
C0400-09	レオネ Leowire 036	(0.9mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-10	レオネ Leowire 040	(1.0mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-11	レオネ Leowire 044	(1.1mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-12	レオネ Leowire 048	(1.2mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-13	レオネ Leowire 052	(1.3mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0400-14	レオネ Leowire 055	(1.4mm)	ラウンドスプリングハードスプール 10m
C0420-12	レオネ 012 オーストラリアン	ワイヤーエキストラスプリング	スプール 8m
C0420-14	レオネ 014 オーストラリアン	ワイヤーエキストラスプリング	スプール 8m
C0420-16	レオネ 016 オーストラリアン	ワイヤーエキストラスプリング	スプール 8m
C0420-18	レオネ 018 オーストラリアン	ワイヤーエキストラスプリング	スプール 8m
C0420-20	レオネ 020 オーストラリアン	ワイヤーエキストラスプリング	スプール 8m
C0430-14	レオネ 014 オーストラリアン	ワイヤースーパースプリング	スプール 8m
C0430-16	レオネ 016 オーストラリアン	ワイヤースーパースプリング	スプール 8m
C0430-18	レオネ 018 オーストラリアン	ワイヤースーパースプリング	スプール 8m
C0430-20	レオネ 020 オーストラリアン	ワイヤースーパースプリング	スプール 8m
C0450-05	レオネ 020 オーストラリアン	ワイヤースーパースプリング	スプール 500g
C0450-06	レオネ Leowire 024	(0.6mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-07	レオネ Leowire 028	(0.7mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-08	レオネ Leowire 032	(0.8mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-09	レオネ Leowire 036	(0.9mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-10	レオネ Leowire 040	(1.0mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-11	レオネ Leowire 044	(1.1mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-12	レオネ Leowire 048	(1.2mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-13	レオネ Leowire 052	(1.3mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0450-14	レオネ Leowire 055	(1.4mm)	ラウンドスプリングハードスプール 500g
C0570-34	レオネ 036 ブリフーム パラタルバー	34mm	5 入

C0570-36	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー	36mm	5 入
C0570-38	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー	38mm	5 入
C0570-40	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー	40mm	5 入
C0570-42	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー	42mm	5 入
C0570-44	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー	44mm	5 入
C0570-46	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー	46mm	5 入
C0570-48	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー	48mm	5 入
C0570-50	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー	50mm	5 入
C0570-52	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー	52mm	5 入
C0570-96	レオネ 036 ブリフォーム パラタルバー キット	34-52mm	50 入
C0576-34	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	34mm	5 入
C0576-36	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	36mm	5 入
C0576-38	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	38mm	5 入
C0576-40	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	40mm	5 入
C0576-42	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	42mm	5 入
C0576-44	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	44mm	5 入
C0576-46	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	46mm	5 入
C0576-48	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	48mm	5 入
C0576-50	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	50mm	5 入
C0576-52	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー	52mm	5 入
C0576-96	レオネ 036 ブリフォーム リバース ループ パラタルバー キット	34-52mm	50 入
C0580-05	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	5.0mm	10 入
C0580-055	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	5.5mm	10 入
C0580-06	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	6.0mm	10 入
C0580-065	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	6.5mm	10 入
C0580-07	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	7.0mm	10 入
C0580-08	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	8.0mm	10 入
C0580-09	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	9.0mm	10 入
C0580-10	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	10.0mm	10 入
C0580-11	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	11.0mm	10 入
C0580-12	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド	12.0mm	10 入
C0580-95	レオネ 0.7mm アダ'ムス クラズ' ラウンド キット	5.0mm-12.0mm	100 入
C0585-25	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	25mm	10 入
C0585-28	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	28mm	10 入
C0585-31	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	31mm	10 入
C0585-34	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	34mm	10 入
C0585-37	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	37mm	10 入
C0585-40	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	40mm	10 入
C0585-43	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	43mm	10 入
C0585-46	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	46mm	10 入
C0585-48	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	48mm	10 入
C0585-50	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ	50mm	10 入
C0585-95	レオネ 0.8mm ブリフォーム ラビ'アル アーチ キット	25mm-50mm	100 入
C1610-17	レオネ 028 (0.7mm) ボール クラズ'	100 入	
C1610-18	レオネ 032 (0.8mm) ボール クラズ'	100 入	
C1610-19	レオネ 036 (0.9mm) ボール クラズ'	100 入	
C3010-16	レオネ 016 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3012-16	レオネ 016×022 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3012-18	レオネ 018×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3012-19	レオネ 019×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3050-16	レオネ 016 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3050-18	レオネ 018 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3052-16	レオネ 016×022 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3052-18	レオネ 018×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3052-19	レオネ 019×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3110-14	レオネ 014 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3110-16	レオネ 016 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3110-18	レオネ 018 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3110-20	レオネ 020 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3111-16	レオネ 016×016 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3112-16	レオネ 016×022 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3112-17	レオネ 017×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3112-18	レオネ 018×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3112-19	レオネ 019×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3112-21	レオネ 021×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3150-14	レオネ 014 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3150-16	レオネ 016 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3150-18	レオネ 018 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3150-20	レオネ 020 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3151-16	レオネ 016×016 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3152-16	レオネ 016×022 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3152-17	レオネ 017×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3152-18	レオネ 018×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3152-19	レオネ 019×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3152-21	レオネ 021×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3210-16	レオネ 016 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3210-18	レオネ 018 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー ラウンド	10 入	
C3212-16	レオネ 016×022 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3212-18	レオネ 018×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	
C3212-19	レオネ 019×025 ブリフォーム チェア'ル アーチワイヤー レクタ'ギューター	10 入	

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

4/4