

類別：聴診器

一般的名称：機械式聴診器
(13755000)

聴診器アルミカラスコープ（ダブル）

品番：MS－1 2 0 DH

本品は
一般医療機器です。

【警告】


- ・ 本品を装着したまま、大きな音は絶対に聴かないで下さい。耳に傷害をきたす場合があります。

【禁忌・禁止】

- ・ 本品を分解、改造しないで下さい。故障の原因になります。
- ・ 本品を投げたり振り回したりしないで下さい。
- ・ イヤーチップが耳管に装着されていない場合は、使用しないで下さい。（耳管のネジ部など金属部分で、耳孔を傷つける場合があります。）
- ・ 部品の破損や傷がある場合は、聴診上に不都合が生じることや、人体（皮膚など）を傷つける可能性がありますので使用しないで下さい。

【形状・構造】

- ・ 全体構図

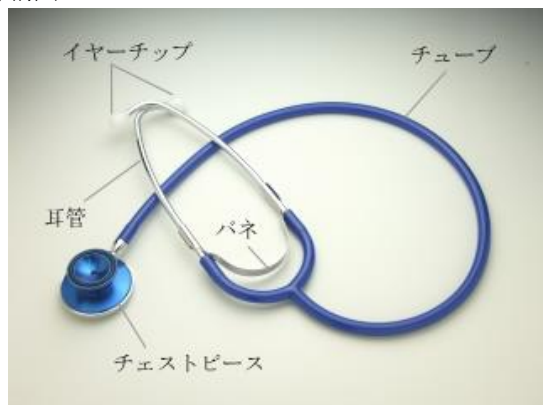

- ・ チェストピース（ダブル）



部 品 名	材 質
耳管（パイプ）	アルミニウム（着色アルマイト）
イヤーチップ	硬質ポリエチレン
バネ	銅板（コバルトメッキ）
チューブ	塩化ビニール
チェストピースD	アルミニウム（着色アルマイト）
シャフト	真鍮（クロムメッキ）
Oリング（ベル面）	塩化ビニール
リング（ダイアフラム面）	亜鉛ダイカスト（クロムメッキ）
振動盤	エポキシファイバー

全長：80 cm 重量：88 g

※作動・動作原理

チェストピースのベル面またはダイアラム面から聴取された音は中心部に位置する音道を通り、シャフト・チューブ・耳管・イヤーチップを通り両耳に送られる。

【使用目的、効能又は効果】

- ・ 心音や呼吸音を主として体内の音を聴き取る。

【操作方法又は使用方法】

1. 耳管先端のイヤーチップを耳孔に入れる。
2. 耳孔とイヤーチップの孔が合うように装着する。
3. チェストピースのシャフトを回転させ、ベル面とダイアラム面のどちらかを選択する。（面の選択はダブルタイプのみです。シングルタイプには必要ありません。）
4. チェストピースを持ち、面を測定部位に当て聴診する。

【使用上の注意】

- ・ 本品は聴診以外の目的で使用しないで下さい。
- ・ チェストピースの振動盤（ダイアフラム面）やベル面を強く叩かないで下さい。
- ・ 性能を十分活用するため、イヤーピースの緩み、耳管、チェストピースのチューブへの差し込みがしっかりしているか確認して下さい。
- ・ 正確な音を聴くためには、できるだけ静かな場所で聴診を行ってください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・ 保管温度：－20℃ ～ 60℃
- ・ 保管場所：直射日光の当たる所、湿度の高い所、ほこりの多い所、寒暖の差が極端に激しい所、極端に高温や低温になる所、振動や衝撃を受ける所、化学薬品の保管場所やガスの発生する所は避けて下さい。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本品に衝撃を与えるような取り扱いは避けて下さい。
- ・ 各部品やネジの勘合部に緩みがないか定期的に点検を行って下さい。
- ・ 耳管、チューブ、チェストピース内に異物が入らないよう留意して下さい。
- ・ 本品が汚れた場合は、柔らかい布でからぶきして下さい。

【包装】

- ・ 1 個／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社モテキ・インダストリイズ
群馬県甘楽郡甘楽町小幡 290-5
TEL：0274-74-2134