

＊＊ 2012 年 7 月 23 日 作成（第 3 版）

認証番号 222AKBZX00002000

＊ 2011 年 7 月 6 日 作成（第 2 版）

2010 年 1 月 29 日（初版作成）

機械器具 81 磁気治療器
管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器 71016000
ラフォーレ 1503F

警告

心臓ペースメーカー等を装着されている方、及び脳せき髄液短絡術用圧可変式シャントなど磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している方は、本機器をご使用になる前に医師にご相談ください。

禁忌・禁止

本治療器は絶対に分解、改造しないでください。

形状・構造及び原理等

ネックレスとして用いる機器で、肩に触れる部分
4 ヶ所に磁石が配置されています。

使用目的、効果又は効能

装着部位のこり及び血行を改善。一般家庭で使用する。

品目仕様等

最大磁束密度 120mT $\pm$ 20mT


操作方法又は使用方法等

表面に金属などの異物が吸引、付着していない事を確認し、
通常のネックレスと同様に引き輪をプレートに掛ける、
または頭からかぶり、首に装着してご使用ください。

使用上の注意

以下の症状に該当する方は、本治療器をご使用になる前に
医師にご相談ください。

1. 悪性腫瘍のある方
2. 心臓に障害のある方
3. 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
4. 糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害のある方
5. 皮膚に感染症及び/又は創傷のある方
6. 安静を必要とする方
7. 体温 38℃以上（有熱期）の方
8. ねんざ、肉離れなど、急性疾患の方
9. 他の治療器との併用はご遠慮ください。
10. ご使用いただいても効果が現れない場合、
医師または専門家にご相談ください。
11. 機器に故障が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。
12. 体にのぼせ等の異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
13. 肌に発しん、発赤、かゆみなどの症状を感じた場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科などの専門医にご相談ください。
14. サウナ等高温の場所、あるいはスキー場等極寒地では本治療器をはずしてください。火傷、凍傷の原因となる場合があります。

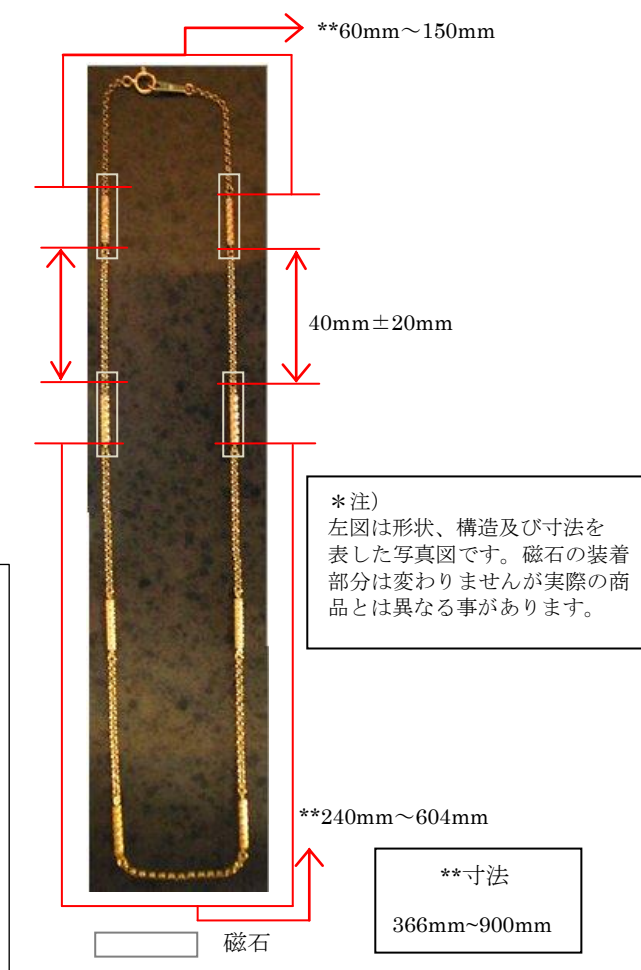

保守・点検に係る事項

1. 携帯電話、磁気カード等、磁気の影響を受ける可能性のあるものは本治療器に近づけないでください。機能を損なう恐れがあります。
2. 装着前に治療器に破れがないかを確認し、磁石装着部に破れがある際はご使用をおやめください。
3. 長期間使用しなかった機器を使用するときは、機器表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してからご使用ください。
4. 本治療器を廃棄する際は、市町村の処理方法に従って廃棄してください。

包装

1 本単位で包装

製造販売業者及び製造業者の氏名または名称及び住所等

＊製造販売業者 株式会社 モリプランニング
東京都江東区亀戸 5-38-4

＊電話 03 (3636) 4173

＊製造業者 株式会社 モリプランニング